


FÜR BESONDERS SENSIBLE BEREICHE

Lichtabsorbierende Farbe

Die einzigartige braune Farbe dieses puderfreien Handschuhs aus Naturlatex absorbiert das grelle Licht im Operationsfeld und erleichtert damit die Adaption der Augen bei sensiblen Einsätzen.

Ideales Tastgefühl

Der extradünne Sempermed Senso ermöglicht auch in hochsensiblen Bereichen präzise Feinmotorik sowie ideales Tastgefühl. Verantwortlich für maximale Sicherheit ist seine gleichmäßige Wandstärkenverteilung, die sich wie eine kaum spürbare zweite Haut anfühlt.

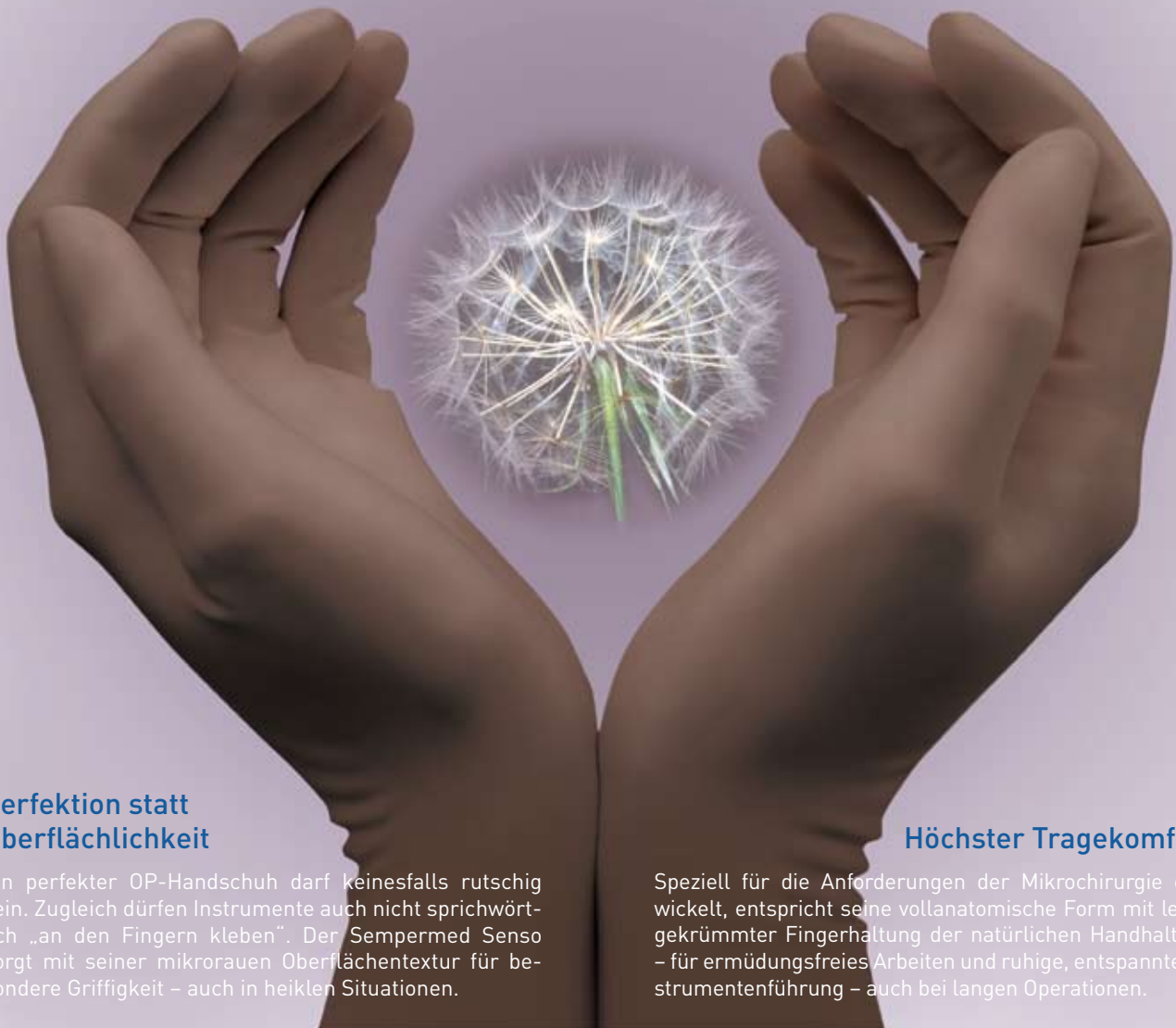

Perfektion statt Oberflächlichkeit

Ein perfekter OP-Handschuh darf keinesfalls rutschig sein. Zugleich dürfen Instrumente auch nicht sprichwörtlich „an den Fingern kleben“. Der Sempermed Senso sorgt mit seiner mikrorauen Oberflächentextur für besondere Griffigkeit – auch in heiklen Situationen.

Höchster Tragekomfort

Speziell für die Anforderungen der Mikrochirurgie entwickelt, entspricht seine vollanatomische Form mit leicht gekrümmter Fingerhaltung der natürlichen Handhaltung – für ermüdungsfreies Arbeiten und ruhige, entspannte Instrumentenführung – auch bei langen Operationen.

sempermed[®] 

senso

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

TECHNISCHE DATEN



sempermed®  **senso**

TYP	steriler Operationshandschuh, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung			
MATERIAL	Naturlatex (NR)			
FARBE	braun			
HANDSCHUHFORM	vollanatomisch mit Rollrand			
GESAMTLÄNGE/GRÖSSE gemäß EN 455-2	5 ½	250 mm	6, 6 ½, 7, 7 ½	280 mm
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	0,14 - 0,18 mm			
DICHTHEIT gemäß EN 455-1	AQL 1,0			
REISSKRAFT gemäß EN 455-2	≥ 12 N			
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	mind. 3 Jahre			
STERILISATION	Gammabestrahlung mit mind. 2,5 Mrad (25 kGy)			
VERPACKUNG	linker und rechter Handschuh gestulpt, in faserfreier Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 50 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 300 Paar			
ARTIKELNUMMERN	Größe 5,5	821751521	Größe 7,5	821751721
	Größe 6,0	821751601	Größe 8,0	821751801
	Größe 6,5	821751621	Größe 8,5	821751821
	Größe 7,0	821751701	Größe 9,0	821751901
KENNZEICHNUNG	EN 1041, EN 980, ISO 15223			

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. · Division Sempermed
1031 Wien · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com