




NATUR
LATEX
FREI

EINE NEUE SYNTHETISCHE HANDSCHUHGENERATION –

LATEXEIGENSCHAFTEN OHNE LATEXALLERGIE!

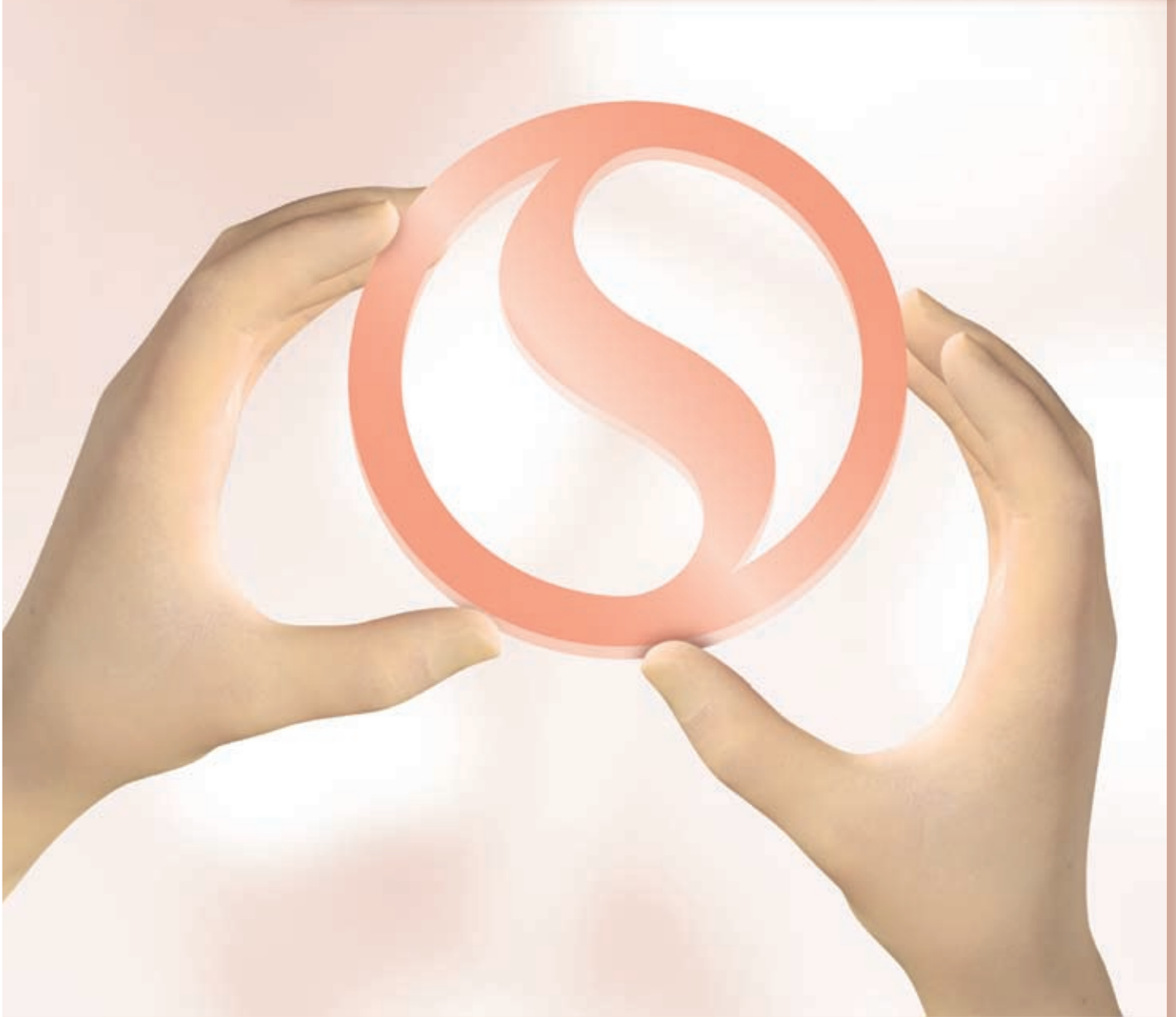

sempermed®  **syntegra IR**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

SEMPERMED SYNTEGRA IR

EINE NEUE SYNTHETISCHE HANDSCHUHGENERATION

Die Innovation im OP: synthetischer Polyisopren (IR).
Glänzt mit denselben physikalischen Eigenschaften wie Naturlatex:
höchste Elastizität und Reißkraft, bei geringer Spannung.

DIE LATEXALLERGIE- PROPHYLAXE

Aus synthetischem Polyisopren

Der Sempermed Syntegra IR schont Arzt und Patient:

- puderfrei
- naturlatexfrei
- frei von allergenen Proteinen.

Somit ist die Gefahr der Sensibilisierung von vornherein ausgeschaltet –
insbesondere für Atopiker.



PATENTIERTE TECHNOLOGIE – EINFACH ANZUZIEHEN

Das Beschichtungssystem und
doppelte Anziehbarkeit



HÖCHSTER KOMFORT

Durch perfekte, vollanatomische Passform



OPTIMALE SICHERHEIT

Für besten Griff



ÜBERZEUGENDE TECHNOLOGIE

Mit innovativem Beschleunigersystem



Der Sempermed Syntegra IR ist durch das weiche, elastische Material, in jeder Situation leicht und schnell angezogen.

Warum sich die Handschuhe so leicht anziehen lassen ist leicht erklärt: Die Innenbeschichtung bildet keine glatte Oberfläche, sondern hat eine spezielle netzartige Struktur, wodurch der Reibungswiderstand beim Anziehen erheblich reduziert wird. Die Struktur vermittelt ein angenehmes Gefühl auf der Haut.

Bei besonders hoher Beanspruchung oder bei Risikopatienten bieten zwei Handschuhe ein Höchstmaß an Sicherheit.

Die Sempermed Operationshandschuhe garantieren problemlose doppelte Anziehbarkeit, bei immer noch ausgesprochen gutem Tastgefühl.

Speziell für die Anforderungen des OP entwickelt, entspricht die vollanatomische Form mit gekrümmten Fingern der natürlichen, entspannten Handhaltung. Diese entspannte Handhaltung gewährleistet, dass Sie mit den Sempermed Syntegra IR ermüdungsfrei arbeiten können – und Ihre Instrumentenführung auch bei längeren Operationen entspannt, ruhig und sicher bleibt. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet auch der extra breite Handrücken.

Ein sicherer Abschluss

Der konische Schaft ist der Anatomie des Handgelenks angepasst und bildet mit seinem Rollrand einen sicheren Abschluss mit dem OP-Mantel.

Die mikrorauhe Oberfläche sichert besten Griff. Für perfekte Instrumentenführung – auch im feuchten Milieu. Die ideale Kombination – ein innovatives Material im bewährten Sempermed Design – für ein Tastgefühl wie bei Naturlatex.

Die in Studien ermittelte optimal gleichmäßige Wanddickenverteilung ist in die Entwicklung des neuen Sempermed Syntegra IR eingeflossen, womit das Tastgefühl deutlich verbessert wurde bei gleichzeitig maximierter Sicherheit.

Der Sempermed Syntegra IR ist weltweit einer der ersten Polyisoprenhandschuhe bei dem ein innovatives Beschleunigersystem (spezielle Dithiocarbamate und Xanthogenate, d.h. Zusatzstoffe, die bei der Handschuhproduktion für den Netzaufbau des Materials verantwortlich sind) zum Einsatz kommt. Der herausragende Vorteil im Gegensatz zu marktüblichen Beschleunigersystemen ist die deutlich verbesserte Hautfreundlichkeit durch geringeres Allergiepotehtial der Beschleuniger im Handschuh.

TECHNISCHE DATEN



sempermed® syntegra IR

TYP	steriler Operationshandschuh, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung			
MATERIAL	synthetisches Polyisopren			
FARBE	creme			
HANDSCHUHFORM	vollanatomisch mit Rollrand			
GESAMTLÄNGE/GRÖSSE gemäß EN 455-2	5 ½, 6 und 6 ½	270 mm	7, 7 ½ und 8	280 mm
	8 ½ und 9	285 mm		
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	0,19 - 0,24 mm			
DICHTHEIT gemäß EN 455-1	AQL 1,0			
REISSKRAFT gemäß EN 455-2	≥ 9 N			
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	mind. 3 Jahre			
STERILISATION	Gammabestrahlung mit mind. 2,5 Mrad (25 kGy)			
VERPACKUNG	linker und rechter Handschuh gestulpt, in faserfreier Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 40 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 240 Paar			
ARTIKELNUMMERN	Größe 5,5	827056521	Größe 7,5	827056721
	Größe 6,0	827056601	Größe 8,0	827056801
	Größe 6,5	827056621	Größe 8,5	827056821
	Größe 7,0	827056701	Größe 9,0	827056901
KENNZEICHNUNG	EN 1041 und EN 980			

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Postfach 2343 · D-56513 Neuwied
Tel.: 0 26 34/99-0 · Fax: 0 26 34/99-64 67
e-mail: info@de.LRmed.com · www.lohmann-rauscher.de

Lohmann & Rauscher GmbH
Postfach 222 · A-1141 Wien
Tel.: 01/576 70-0 · Fax: 01/577 17-99
e-mail: info@at.LRmed.com · www.lohmann-rauscher.at

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed · 1031 Wien · Modecenterstraße 22 · www.sempermed.com