

DINE HÆNDER I DE BEDSTE HÆNDER



Operationshandskerne fra Sempermed står med over 90 års forsknings- og produktionsknowhow for sikkerhed og professionalitet på højeste niveau.

Sempermed operationshandskerne med den enestående kombination af perfekt greb, optimal føling og maksimal komfort skiller sig virkelig ud fra mængden. Den brede vifte af produkter med klassiske operationshandsker og specialhandsker med specifikke produkt- og materialeegenskaber byder på den rigtige løsning til ethvert behov.

Kompetencen fra en europæisk producent og den personlige service på stedet gør Sempermed til din problemløser når det gælder operationshandsker.

OPTIMAL SIKKERHED

Topprestationer med fingerspidsfølelse



Du arbejder på et yderst sensibelt område, hvilket kræver præcis finmotorik og optimal føling. Den afgørende faktor mht. maksimal sikkerhed og fremragende følesans er handskerne tykkelse. Latexmaterialet i alle Sempermed operationshandsker er så stærkt, at vi har kunnet reducere handskens tykkelse så meget, at din følesans er uindskrænket og der samtidig kan garanteres for maksimal sikkerhed.

SIKKERT ARBEJDE UDEN RISIKO FOR AT BLIVE TRÆT

Behagelig at have på



Til operationer kræves der fuldt anatomisk formede handsker der hindrer at der opstår træthed under arbejdet; dette krav har dannet basis for det årelange arbejde med at udvikle handskeformen.

Handsken form svarer til den afslappede håndstilling med naturligt bøjede fingre, og den sikrer at du kan arbejde med Sempermed operationshandskerne uden at blive træt under arbejdet.

Andre særlige træk ved Sempermed handskeformen er den ekstra brede håndryg der reducerer tegn på træthed samt den koniske manchete der er udformet efter håndleddets anatomi, og som har en rullekant der danner en sikker grænse mod operationskitlen.

PERFEKT INSTRUMENTFØRING

Et sikkert greb giver en sikker følelse




Den perfekte operationshandske er komplet skridsikker, men på den anden side må instrumenterne heller ikke klæbe fast til den. For at opnå den gyldne middelev er overfladen på de porcelænsforme der bruges til Sempermed handsker, mikroru og giver dermed et perfekt greb.

Grebet optimeres desuden med en kemisk overfladebehandling.

Sempermed Supreme+ giver dig det bedste greb blandt alle Sempermed operationshandsker og kombinerer samtidig maksimal sikkerhed, ideel føling og perfekt instrumentføring!

PATENTERET TEKNOLOGI – NEM AT TAGE PÅ

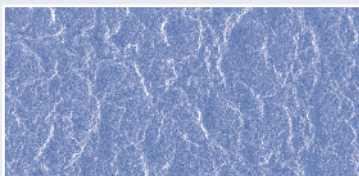

Den indvendige coatings netlignende struktur:
reducerer friktion => let at tage på

Den patenterede, syntetiske indvendige coating i puderfrie operationshandsker har ingen glat overflade. Tværtimod bevirker den netlignende struktur en væsentlig reduktion af friktionsmodstanden når man ifører sig handsken. Strukturen gør det lettere for handsken at smygge sig op ad hudoverfladen og øger dermed handskens komfort.

DEN INTRA-OPERATIVE UD- SKIFTNING AF HANDSKER



Studier har vist at 10-45% af alle operationshandsker, afhængigt af hvilket område de bruges på, har perforationer, hvoraf ca. halvdelen allerede opstår under de første 30 minutter af operationen („The risk of surgical glove perforations“, PubMed Norway, marts 2007). Ved længere indgreb dannes der desuden sved mellem hudens overflade og handsken. Derfor anbefaler Sempermed at man regelmæssigt skifter handsker under operationen. Den specielle indvendige coating i Sempermed operationshandskerne gør det meget nemmere at tage handskerne på.

DOBBELTE HANDSKER - DOBBELT BESKYTTELSE



To par handsker giver optimal sikkerhed ved særlig høj belastning eller til brug ved risikopatienter. Sempermed operationshandsker garanterer at man kan tage to par handsker på over hinanden fuldstændig uden problemer.

Anbefaling: Den inderste handske bør være et halvt nummer større end den størrelse du plejer at bruge.

FREM RAGENDE OG HUDVENLIG

Velvære for din hud



Sempermed benytter en selvudviklet, automatisk Semperit-efterbehandling hvor Sempermed handskerne vaskes i flere omgange. Dermed reduceres produktionsbetingede, hudirriterende substanser og naturlatex-proteinindholdet til det teknisk mulige minimum. Risikoen for partikelbelastning på grund af puderpartikler på operationsstuen og for granulomdannelse hos patienterne er dermed kraftigt reduceret.

Det brede sortiment af puderfrie operationshandsker til forskellige behov har en selvskreven standard af medicinske, menneskelige og helbredsøkonomiske faktorer.

ANSVAR FOR FLERE GENERATIONER



Med sin produktion af operationshandsker påtager Sempermed sig ikke kun ansvaret for din sikkerhed, men også for de kommende generationers ve og vel.

For os er det en selvfølge at der under produktionen anvendes miljøbevidste hightech-metoder og maskiner, at de aggressive kemikalier i efterbehandlingen er reduceret med innovative metoder samt at produktionsprocesserne løbende optimeres med hensyn til miljøvenlighed.

KVALITET FRA HJERTET AF EUROPA



Ud over forskning og udvikling prioriteres især sikkerhed og kvalitet meget højt hos Sempermed. Den konstant høje produktkvalitet samt en konstant stræben efter perfektion ligger under de lovmæssigt foreskrevne AQL-værdier (Acceptable Quality Level – et af de vigtigste kvalitetskriterier for produktionen).

Med vores centralt beliggende europæiske produktionsafdeling med de højeste krav til kvalitetskontrol samt forsknings- og udviklingsarbejde på europæisk topniveau bidrager vi til at øge din sikkerhed.

EN NY HANDSKEGENERATION – Innovation på operationsstuen: syntetisk polyisopren (IR). Har alle de fremragende fysiske egenskaber der kendes fra naturlatex: maksimal elasticitet og trækstyrke og samtidig lav spænding. Profylakse mod latexallergi.



PRODUKTHIGHLIGHTS

- Syntetisk polyisopren skåner både læge og patient
- Pufferfri naturlatexfri, fri for allergene proteiner
- Optimal sikkerhed
- Den mikro-ru overfladetekstur giver perfekt greb selv under fugtige omgivelser
- Samme følelse som med naturlatex
- Anatomisk perfekt form med bredere og mere bekvem hånddryg og naturligt bøjede fingre

ARTIKELNUMRE

Størrelse 5,5	827056521
Størrelse 6,0	827056601
Størrelse 6,5	827056621
Størrelse 7,0	827056701
Størrelse 7,5	827056721
Størrelse 8,0	827056801
Størrelse 8,5	827056821
Størrelse 9,0	827056901

TEKNISKE DETALJER

TYPE	Steril operationshandske, pudderfri, med syntetisk indvendig coating	
MATERIALE	syntetisk polyisopren	
FARVE	creme	
HANDSKEFORM	Fuld anatomisk med rullekant	
LÆNGDE I ALT/STØRRELSE iht. EN 455-2	5½, 6 og 6½ 7, 7½ og 8 8½ og 9	270 mm 280 mm 285 mm
MATERIALETYKKELSE målt enkelt i håndfladen	0,19 - 0,24 mm	
SIKKERHED MOD PERFORATIONER iht. EN 455-1	AQL 1,0	
TRÆKSTYRKE iht. EN 455-2	≥ 9 N	
HOLDBARHED i original emballage og opbevaret i henhold til DIN 7716, ISO 2230	3 år	
STERILISERING	Gammabestråling med mindst 2,5 Mrad (25°kGy)	
EMBALLERING	Venstre og højre handske med ombukket manchete i fiberfri indpakning, ozontæt, svejset i medicinsk peel-pack I dispenseræske med steriliseringsindikator: 40 par I transportæske med steriliseringsindikator: 240 par	

TIL SPECIELT SENSIBLE OMRÅDER – Den ekstra tynde operationshandske Sempermed Senso muliggør præcis finmotorik, ideel føling og optimalt greb kombineret med maksimal sikkerhed – selv på yderst sensible områder. Udviklet specielt til kravene inden for mikro-kirurgi, især velegnet til anvendelse fx inden for neurologi, endoskopi, øjen- og karkirurgi.



PRODUKTHIGHLIGHTS

- Syntetisk indvendig coating gør handsken let at tage af og på
- Vasket flere gange, fuldstændig pudderfri
- Den jævne fordeling af materialetykkelsen giver maksimal sikkerhed
- Den mikro-ru overfladetekstur giver perfekt greb
- Anatomisk perfekt form med bredere og mere bekvem hånddryg og naturligt bøjede fingre

ARTIKELNUMRE

Størrelse 5,5	821751521
Størrelse 6,0	821751601
Størrelse 6,5	821751621
Størrelse 7,0	821751701
Størrelse 7,5	821751721
Størrelse 8,0	821751801
Størrelse 8,5	821751821
Størrelse 9,0	821751901

TEKNISKE DETALJER

TYPE	Tynd, steril operationshandske, pudderfri, med syntetisk indvendig coating	
MATERIALE	naturlatex (NR)	
FARVE	brun	
HANDSKEFORM	Fuld anatomisk med rullekant	
LÆNGDE I ALT/STØRRELSE iht. EN 455-2	5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½ og 9	250 mm 280 mm
MATERIALETYKKELSE målt enkelt i håndfladen	0,14 - 0,18 mm	
SIKKERHED MOD PERFORATIONER iht. EN 455-1	AQL 1,0	
TRÆKSTYRKE iht. EN 455-2	≥ 12 N	
HOLDBARHED i original emballage og opbevaret i henhold til DIN 7716, ISO 2230	3 år	
STERILISERING	Gammabestråling med mindst 2,5 Mrad (25°kGy)	
EMBALLERING	Venstre og højre handske med ombukket manchete i fiberfri indpakning, ozontæt, svejset i medicinsk peel-pack I dispenseræske med steriliseringsindikator: 50 par I transportæske med steriliseringsindikator: 300 par	



NOMEN EST OMEN – Premium kvalitet. Med et helt specielt godt tilbud i forhold til prisen. En handske type til alle medarbejdere - fra overlægen til sygeplejersken.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- Patenteret syntetisk indvendig coating gør handsken let at tage af og på
- Vasket flere gange, fuldstændig pudderfri
- Fremragende hudvenlighed
- Ingen partikelbelastning på operationsstuen og hos patienterne som følge af pudderpartikler, ingen granulomdannelse
- Anatomisk perfekt form med bredere og mere bekvem hånddryg og naturligt bøjede fingre

ARTIKELNUMRE

- Størrelse 5,5 822751521
- Størrelse 6,0 822751601
- Størrelse 6,5 822751621
- Størrelse 7,0 822751701
- Størrelse 7,5 822751721
- Størrelse 8,0 822751801
- Størrelse 8,5 822751821
- Størrelse 9,0 822751901

TEKNISKE DETALJER

TYPE	Steril operationshandske, pudderfri, med syntetisk indvendig coating	
MATERIALE	naturlatex (NR)	
FARVE	naturhvid	
HANDSKEFORM	Fuld anatomisk med rullekant	
LÆNGDE I ALT/STØRRELSE iht. EN 455-2	5½, 6 og 6½ 7, 7½ og 8 8½ og 9	270 mm 280 mm 285 mm
MATERIALETYKKELSE målt enkelt i håndfladen	0,19 - 0,24 mm	
SIKKERHED MOD PERFORATIONER iht. EN 455-1	AQL 1,0	
TRÆKSTYRKE iht. EN 455-2	≥ 12 N	
HOLDBARHED i original emballage og opbevaret i henhold til DIN 7716, ISO 2230	3 år	
STERILISERING	Gammabestråling med mindst 2,5 Mrad (25°kGy)	
EMBALLERING	Venstre og højre handske med ombukket manchete i fiberfri indpakning, ozontæt, svejset i medicinsk peel-pack I dispenseræske med steriliseringsindikator: 50 par I transportæske med steriliseringsindikator: 300 par	



GREB OM TINGENE – Greb om tingene i enhver situation med maksimal sikkerhed, ideel føling og perfekt instrumenthåndtering.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- Maksimalt greb i Sempermeds sortiment
- Patenteret syntetisk indvendig coating gør handsken let at tage af og på
- Vasket flere gange, fuldstændig pudderfri
- Ingen partikelbelastning på operationsstuen og hos patienterne som følge af pudderpartikler, ingen granulomdannelse
- Anatomisk perfekt form med bredere og mere bekvem hånddryg og naturligt bøjede fingre

ARTIKELNUMRE

- Størrelse 5,5 822851521
- Størrelse 6,0 822851601
- Størrelse 6,5 822851621
- Størrelse 7,0 822851701
- Størrelse 7,5 822851721
- Størrelse 8,0 822851801
- Størrelse 8,5 822851821
- Størrelse 9,0 822851901

TEKNISKE DETALJER

TYPE	Steril operationshandske, pudderfri, med syntetisk indvendig coating	
MATERIALE	naturlatex (NR)	
FARVE	naturhvid	
HANDSKEFORM	Fuld anatomisk med rullekant	
LÆNGDE I ALT/STØRRELSE iht. EN 455-2	5½, 6 og 6½ 7 og 7½ 8, 8½ og 9	270 mm 280 mm 285 mm
MATERIALETYKKELSE målt enkelt i håndfladen	0,19 - 0,24 mm	
SIKKERHED MOD PERFORATIONER iht. EN 455-1	AQL 1,0	
TRÆKSTYRKE iht. EN 455-2	≥ 12 N	
HOLDBARHED i original emballage og opbevaret i henhold til DIN 7716, ISO 2230	3 år	
STERILISERING	Gammabestråling med mindst 2,5 Mrad (25°kGy)	
EMBALLERING	Venstre og højre handske med ombukket manchete i fiberfri indpakning, ozontæt, svejset i medicinsk peel-pack I dispenseræske med steriliseringsindikator: 50 par I transportæske med steriliseringsindikator: 300 par	



GREEN M – Denne puderfrie handske af naturlatex har en enestående grøn farve der absorberer det grelle lys i operationsområdet og som dermed letter øjnenes tilvænning i sensible situationer.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- God kontrast til organerne pga. den grønne farve
- Den mikro-ru overfladestruktur giver perfekt greb
- Specielt velegnet til brug inden for neurologi, øjen- og hjertekirurgi samt til endoskopi og andre sensitive anvendelsesområder
- Anatomisk perfekt form med bredere og mere bekvem hånddryg og naturligt bøjede fingre
- For at opnå maksimal sikkerhed i særligt kritiske situationer anbefaler Sempermed at bære to par handsker uden på hinanden

ARTIKELNUMRE

Størrelse 5,5	823756521
Størrelse 6,0	823756601
Størrelse 6,5	823756621
Størrelse 7,0	823756701
Størrelse 7,5	823756721
Størrelse 8,0	823756801
Størrelse 8,5	823756821
Størrelse 9,0	823756901

TEKNISKE DETALJER

TYPE	Steril operationshandske, puderfri, med syntetisk indvendig coating	
MATERIALE	naturlatex (NR)	
FARVE	grøn	
HANDSKEFORM	Fuld anatomisk med rullekant	
LÆNGDE I ALT/STØRRELSE iht. EN 455-2	5½	275 mm
	6, 6½ og 7	280 mm
	7½, 8, 8½ og 9	290 mm
MATERIALETYKKELSE målt enkelt i håndfladen	min. 0,2 mm	
SIKKERHED MOD PERFORATIONER iht. EN 455-1	AQL 1,0	
TRÆKSTYRKE iht. EN 455-2	≥ 12 N	
HOLDBARHED i original emballage og opbevaret i henhold til DIN 7716, ISO 2230	3 år	
STERILISERING	Gammabestråling med mindst 2,5 Mrad (25°kGy)	
EMBALLERING	Venstre og højre handske med ombukket manchete i fiberfri inderpakning, ozontæt, svejset i medicinsk peel-pack I dispenseræske med steriliseringsindikator: 40 par I transportæske med steriliseringsindikator: 240 par	

ET HURTIGT OVERBLIK

OPERATIONSHANDSKER FRA SEMPERMED



	sempermed [®] syntegra IR	sempermed [®] senso	sempermed [®] supreme
TYPE	Steril operationshandske, pudderfri, med syntetisk indvendig coating	Tynd, steril operationshandske, pudderfri, med syntetisk indvendig coating	Steril operationshandske, pudderfri, med syntetisk indvendig coating
MATERIALE	syntetisk polyisopren	naturalatex (NR)	naturalatex (NR)
FARVE	creme	brun	naturhvid
TYKKELSE målt enkelt i håndfladen	0,19 - 0,24 mm	0,14 - 0,18 mm	0,19 - 0,24 mm
TRÆKSTYRKE Iht. EN 455-2	≥ 9 N	≥ 12 N	≥ 12 N



	sempermed [®] GREEN M	sempermed [®] supreme+
TYPE	Steril operationshandske, pudderfri, med syntetisk indvendig coating	Steril operationshandske, pudderfri, med syntetisk indvendig coating
MATERIALE	naturalatex (NR)	naturalatex (NR)
FARVE	grøn	naturhvid
TYKKELSE målt enkelt i håndfladen	min. 0,2 mm	0,19 - 0,24 mm
TRÆKSTYRKE Iht. EN 455-2	≥ 12 N	≥ 12 N

Danpleje · OneMed Denmark A/S
P.O. Pedersens Vej 16 · 8200 Århus N
Tlf.: 86 109 109 · Fax: 86 109 209
danpleje@onemed.com · www.onemed.dk

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
Division Sempermed
1031 Wien · Modecenterstraße 22 · Østrig
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com

Kontakt os!

We would be pleased to assist you.

