



# KEZE A LEGJOBB KEZEKBEN VAN



A Sempermed sebészeti kesztyűk 85 éves kutatás és gyártási tapasztalat eredményeként a legmagasabb szintű biztonságot és szakértelmet képviselik.

A Sempermed sebészeti kesztyűket elsősorban a biztos fogás, az optimális tapintásérzet és a maximális kényelem kombinációja teszi egyedülállóvá. Klasszikus sebészeti kesztyűink és sajátos termék- és anyagtulajdonságokkal rendelkező speciális kesztyűink széles választékának köszönhetően minden igényre megtaláljuk a kellő megoldást.

A Sempermed európai gyártóként szerzett kompetenciája és a helyben nyújtott személyes ügyfélszolgálat révén megold minden problémát a sebészeti kesztyűk terén.

## OPTIMÁLIS BIZTONSÁG

Csúcsteljesítmények finom érzékkel



Az Ön különösen érzékeny munkaterületén nélkülözhetetlen a pontos finommotorika és az optimális tapintásérzet. A lehető legnagyobb biztonság és a kiváló tapintás egyidejű megléte a kesztyű falvastagságán múlik. A Sempermed sebészeti kesztyűk falvastagságát a latexbevonat ellenállóképességének köszönhetően úgy csökkentettük, hogy a lehető legnagyobb biztonság mellett az Ön érzékelése se szenvedjen csorbát.

## BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KIFÁRADÁS NÉLKÜL

Maximálisan kényelmes viselet



Több éves kutatási tevékenységünk célját a műtétek során a kifáradás nélküli munkavégzést lehetővé tevő teljesen anatómikus kesztyűforma kialakítása jelentette.

A behajlított ujjakat formázó kesztyűforma megfelel a természetesen laza kéztartásnak és lehetővé teszi a Sempermed sebészeti kesztyűkkel való kifáradás nélküli munkavégzést.

A Sempermed kesztyűk formájára jellemző ezen kívül a kifáradást csökkentő különösen széles kézhát és a kesztyű kúp alakú csuklórésze, mely tökéletesen illeszkedik a csukló formájához, és göngyölt szárának köszönhetően biztonságos lezárást képez a műtéti köpennyel.

## TÖKÉLETES MŰSZERKEZELÉS

A biztonságos fogás biztonságot ad




A tökéletes sebészeti kesztyű nem lehet csúszós. Ugyanakkor nem ragadhatnak oda (not need) hozzá a műszerek sem. Itt az arany középutat járjuk: a Sempermed kesztyűk porcelán merítőformáinak mikro-érdes felülete ideális fogást biztosít. A következő lépésben elvégzett vegyi felületkezelés a fogást még optimálisabbá teszi.

A Sempermed sebészeti kesztyűk közül a Sempermed Supreme+ garantálja a legbiztosabb fogást, és kombinálja a maximális biztonságot, az ideális tapintásérzetet és a tökéletes műszerkezelést.

## SZABADALMAZTATOTT TECHNOLÓGIA

- Könnyen felhúzható kesztyűk

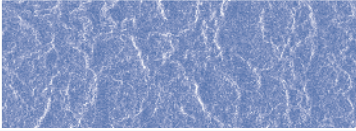

**A belső bevonat hálós szerkezete:**  
csökken a súrlódás => a kesztyű  
könnyebben felhúzható

A szabadalmaztatott szintetikus belső bevonat a púdermentes sebészeti kesztyűk esetén nem képez csúszós felületet, hanem hálós szerkezete által jelentősen csökkenti a kesztyű felhúzásakor keletkező súrlódási ellenállást. A felület szerkezete elősegíti, hogy a kesztyű tökéletesen rásimuljon a bőrre, és így kényelmesebb viselni.

## KESZTYŰVÁLTÁS MŰTÉT KÖZBEN



Vizsgálatok kimutatták, hogy a műtéti kesztyűk 10-45%-a – az alkalmazási területtől függően – perforálódik az alkalmazás során, és hogy a perforációk kb. fele már a műtét első 30 percében fellép („The risk of surgical glove perforations”, PubMed Norway, 2007. március). Ha hosszabb a műtéti beavatkozás, a bőrfelület és a kesztyű között képződő izzadság is a védő filmréteg fokozatos felduzzadásához vezet. Ezért a Sempermed rendszeres kesztyűváltást ajánl a műtétek alatt. A Sempermed sebészeti kesztyűk speciális belső bevonata jelentősen leegyszerűsíti a kesztyű felhúzását.

## KÉT PÁR KESZTYŰ - DUPLA VÉDELEM



Ha a kesztyűnek nagy terhelést kell kibírnia, vagy ha rizikóbetegeket kell ellátni, a dupla pár kesztyű maximális biztonságot nyújt. A Sempermed sebészeti kesztyűk lehetővé teszik két pár kesztyű problémamentes felhúzását is.

Javaslatunk: az alul viselt kesztyű legyen az Ön szokványos kesztyűméreténél fél mérettel nagyobb.

## KÜLÖNÖSEN BŐRKÍMÉLŐ KESZTYŰK

Bőre egészsége érdekében



A Sempermed kifejlesztett egy automatikus utókezelési eljárást, melynek során a Sempermed kesztyűket többször átmoszák. Ezáltal a lehető legalacsonyabb a gyártás során keletkező bőrirritáló anyagok és a natúrlatex fehérjetartalmának aránya. Így jelentősen csökken annak a veszélye, hogy a púderreszecskek miatt szennyeződés kerül a műtőbe, illetve hogy a betegnél granulómák képződnek.

Púdermentes sebészeti kesztyűink széles választéka kielégíti a legkülönbözőbb igényeket, és természetesen mind orvosi, mind emberi és egészséggazdasági szempontból megfelel a standard előírásoknak.

## TÖBB GENERÁCIÓÉRT IS FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK



A sebészeti kesztyűk gyártásával a Sempermed nemcsak az Ön biztonságáért vállal felelősséget, hanem a következő generációk jólétéért is.

A környezetvédelmet figyelembe vevő hightech-eljárásokkal és gépekkel végzett gyártás, az agresszív vegyszerek innovatív módszerekkel való csökkentése az utókezelés során, valamint a gyártási folyamat állandó környezetkímélő optimalizálása természetes számunkra.

## MINŐSÉG EURÓPA SZÍVÉBŐL



A Sempermednél a kutatás és fejlesztés mellett a biztonság és a minőség is különös hangsúlyt kap. Az állandóan magas minőségnek és a tökéletességre való tartós törekvésnek köszönhetően termékeink AQL-értéke (Acceptable Quality Level – a termelés egyik legjelentősebb minőségi kritériuma) a törvényesen előírt értékhatár alatt van.

A minőségellenőrzés legmagasabb elvárásait is teljesítő európai gyártóhelyünk és az európai csúcsszinten folytatott kutató- és fejlesztőmunka garantálja az Ön biztonságát.

**AZ ÚJ KESZTYŰGENERÁCIÓ** – innováció a műtőben: szintetikus poliizoprén (IR). Ugyanazon fizikai tulajdonságokkal büszkélkedhet, mint a natúrlatex: maximális rugalmasság és szakadási ellenállás jellemzi csekély feszülés mellett. A latexallergia megelőzésére.



### FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

- A szintetikus poliizoprén kíméli az orvost és a beteget is
- Púdermentes, natúrlatexmentes, mentes az allergén fehérjétől
- Optimális biztonság
- A mikroérdes felszíni textúra tökéletes fogást biztosít - nedves környezetben is
- A tapintásérzet olyan, mint a natúrlatex esetén
- Anatómikusan tökéletes forma széles és kényelmes kézfejjel és természetesen behajló ujjformával

### CIKKSZÁMOK

<b>5,5-es méret</b>	827056521
<b>6,0-os méret</b>	827056601
<b>6,5-es méret</b>	827056621
<b>7,0-es méret</b>	827056701
<b>7,5-es méret</b>	827056721
<b>8,0-as méret</b>	827056801
<b>8,5-es méret</b>	827056821
<b>9,0-es méret</b>	827056901

### MŰSZAKI ADATOK

<b>TÍPUS</b>	steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal	
<b>ANYAG</b>	Szintetikus poliizoprén	
<b>SZÍN</b>	krémszínű	
<b>KESZTYŰFORMA</b>	teljesen anatómikus, göngyölt szárral	
<b>TELJES HOSSZ MÉRTEKENKÉNT</b> az EN 455-2 szerint	5 ½, 6 és 6 ½ 7, 7 ½ és 8 8 ½ és 9	270 mm 280 mm 285 mm
<b>FALVASTAGSÁG</b> a tenyérrészen, egyszer mérve	0,19 - 0,24 mm	
<b>VÍZHATLANSÁG</b> az EN 455-1 szerint	AQL 1,0	
<b>SZAKADÁS</b> az EN 455-2 szerint	≥ 9 N	
<b>FELHASZNÁLHATÓSÁG</b> Eredeti csomagolásban a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tárolás esetén	min. 3 év	
<b>STERILIZÁLÁS</b>	Gamma sugárzás minimum 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>CSOMAGOLÁS</b>	jobb és bal kesztyű szárával rostmentes belső zsebbe tűrve, légmentesen, lezárt egészségügyi tasakban Sterilitás jelzővel ellátott adagolódobozban: 40 pár Sterilitás jelzővel ellátott szállítókartonban: 240 pár	

**KÜLÖNÖSEN ÉRZÉKENY ALKALMAZÁSI TERÜLETEKRE** – Az extravékony Sempermed Senso sebészeti kesztyű lehetővé teszi az igen érzékeny területeken is a precíz finommotorikát, az ideális tapintásérzetet és a maximális biztonság mellett jó fogást. A kesztyűt speciálisan a mikrosebészet követelményeinek megfelve fejlesztettük ki, pl. neurológiai, endoszkópai, szemsebészeti és érsebészeti alkalmazásra.



### FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

- Szintetikus belső bevonat a könnyű le- és felhúzás érdekében
- Többszörösen mosott, teljesen púdermentes
- Maximális biztonság az egyenletes falvastagságának köszönhetően
- A mikroérdes felszíni textúra tökéletes fogást biztosít
- Anatómikusan tökéletes forma széles és kényelmes kézfejjel és természetesen behajló ujjformával

### CIKKSZÁMOK

<b>5,5-es méret</b>	821751521
<b>6,0-os méret</b>	821751601
<b>6,5-es méret</b>	821751621
<b>7,0-es méret</b>	821751701
<b>7,5-es méret</b>	821751721
<b>8,0-as méret</b>	821751801
<b>8,5-es méret</b>	821751821
<b>9,0-es méret</b>	821751901

### MŰSZAKI ADATOK

<b>TÍPUS</b>	vékony, steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal	
<b>ANYAG</b>	Natúrlatex (NR)	
<b>SZÍN</b>	barna	
<b>KESZTYŰFORMA</b>	teljesen anatómikus, göngyölt szárral	
<b>TELJES HOSSZ MÉRTEKENKÉNT</b> az EN 455-2 szerint	5 ½, 6, 6 ½, 7, 7 ½, 8, 8 ½ és 9	250 mm 280 mm
<b>FALVASTAGSÁG</b> a tenyérrészen, egyszer mérve	0,14 - 0,18 mm	
<b>VÍZHATLANSÁG</b> az EN 455-1 szerint	AQL 1,0	
<b>SZAKADÁS</b> az EN 455-2 szerint	≥ 12 N	
<b>FELHASZNÁLHATÓSÁG</b> Eredeti csomagolásban a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tárolás esetén	min. 3 év	
<b>STERILIZÁLÁS</b>	Gamma sugárzás minimum 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>CSOMAGOLÁS</b>	jobb és bal kesztyű szárával rostmentes belső zsebbe tűrve, légmentesen, lezárt egészségügyi tasakban Sterilitás jelzővel ellátott adagolódobozban: 50 pár Sterilitás jelzővel ellátott szállítókartonban: 300 pár	



**NOMEN EST OMEN** – Kiváló minőség különösen jó ár-teljesítmény aránnyal. Az összes dolgozó számára alkalmas kesztyűtípus – a főorvostól a nővérig.

### FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

- Szabadalmaztatott szintetikus belső bevonat a könnyű le- és felhúzás érdekében
- Többszörösen mosott, teljesen púdermentes
- Különösen bőrkímélő
- A műtőben nem keletkezik részecskék okozta terhelés, a betegnél nem lép fel granulómaképződés
- Anatómikusan tökéletes forma széles és kényelmes kézfejjel és természetesen behajló ujjformával

### CIKKSZÁMOK

<b>5,5-es méret</b>	822751525
<b>6,0-os méret</b>	822751605
<b>6,5-es méret</b>	822751625
<b>7,0-es méret</b>	822751705
<b>7,5-es méret</b>	822751725
<b>8,0-as méret</b>	822751805
<b>8,5-es méret</b>	822751825
<b>9,0-es méret</b>	822751905

### MŰSZAKI ADATOK

<b>TÍPUS</b>	steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal	
<b>ANYAG</b>	Natúrlatex (NR)	
<b>SZÍN</b>	természetes fehér	
<b>KESZTYŰFORMA</b>	teljesen anatómikus, göngyölt szárral	
<b>TELJES HOSSZ MÉRETENKÉNT</b> az EN 455-2 szerint	5 ½, 6 és 6 ½ 7, 7 ½ és 8 8 ½ és 9	270 mm 280 mm 285 mm
<b>FALVASTAGSÁG</b> a tenyérrészen, egyszer mérve	0,19 - 0,24 mm	
<b>VÍZHATLANSÁG</b> az EN 455-1 szerint	AQL 1,0	
<b>SZAKADÁS</b> az EN 455-2 szerint	≥ 12 N	
<b>FELHASZNÁLHATÓSÁG</b> Eredeti csomagolásban a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tárolás esetén	min. 3 év	
<b>STERILIZÁLÁS</b>	Gamma sugárzás minimum 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>CSOMAGOLÁS</b>	jobb és bal kesztyű szárával rostmentes belső zsebbe tűrve, légmentesen, lezárt egészségügyi tasakban Sterilitás jelzővel ellátott adagolódobozban: 50 pár Sterilitás jelzővel ellátott szállítókartonban: 300 pár	



**BIZTOS FOGÁS MINDEN HELYZETBEN** – egyedejüleg maximális biztonság, ideális tapintásérzet és tökéletes műszerkezelés.

### FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

- A legjobb fogás a Sempermed termékválasztékán belül
- Szabadalmaztatott szintetikus belső bevonat a könnyű le- és felhúzás érdekében
- Többszörösen mosott, teljesen púdermentes
- A műtőben nem keletkezik részecskék okozta terhelés, a betegnél nem lép fel granulómaképződés
- Anatómikusan tökéletes forma széles és kényelmes kézfejjel és természetesen behajló ujjformával

### CIKKSZÁMOK

<b>5,5-es méret</b>	822851521
<b>6,0-os méret</b>	822851601
<b>6,5-es méret</b>	822851621
<b>7,0-es méret</b>	822851701
<b>7,5-es méret</b>	822851721
<b>8,0-as méret</b>	822851801
<b>8,5-es méret</b>	822851821
<b>9,0-es méret</b>	822851901

### MŰSZAKI ADATOK

<b>TÍPUS</b>	steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal	
<b>ANYAG</b>	Szintetikus poliizoprén	
<b>SZÍN</b>	krémszínű	
<b>KESZTYŰFORMA</b>	teljesen anatómikus, göngyölt szárral	
<b>TELJES HOSSZ MÉRETENKÉNT</b> az EN 455-2 szerint	5 ½, 6 és 6 ½ 7 és 7 ½ 8, 8 ½ és 9	270 mm 280 mm 285 mm
<b>FALVASTAGSÁG</b> a tenyérrészen, egyszer mérve	0,19 - 0,24 mm	
<b>VÍZHATLANSÁG</b> az EN 455-1 szerint	AQL 1,0	
<b>SZAKADÁS</b> az EN 455-2 szerint	≥ 12 N	
<b>FELHASZNÁLHATÓSÁG</b> Eredeti csomagolásban a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tárolás esetén	min. 3 év	
<b>STERILIZÁLÁS</b>	Gamma sugárzás minimum 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>CSOMAGOLÁS</b>	jobb és bal kesztyű szárával rostmentes belső zsebbe tűrve, légmentesen, lezárt egészségügyi tasakban Sterilitás jelzővel ellátott adagolódobozban: 50 pár Sterilitás jelzővel ellátott szállítókartonban: 300 pár	

**GREEN M** – A púdermentes natúrlatex kesztyű páratlan zöld színe elnyeli a vakítóan éles műtői fényt és megkönnyíti a szem alkalmazkodását az érzékeny műtéti beavatkozások során.



### FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

- A zöld szín kontrasztot képez a szervekkel
- A mikroérdes felszíni textúra tökéletes fogást biztosít
- Különösen jól alkalmazható neurológiai, szem- és szívsebészeti osztályokon, valamint endoszkópia során és egyéb érzékeny felhasználási területeken
- Anatómikusan tökéletes forma széles és kényelmes kézfejjel és természetesen behajló ujjformával
- A különösen kritikus helyzetekben a Sempermed a maximális biztonság érdekében két pár kesztyű egyidejű viselését ajánlja

### CIKKSZÁMOK

<b>5,5-es méret</b>	823756521
<b>6,0-os méret</b>	823756601
<b>6,5-es méret</b>	823756621
<b>7,0-es méret</b>	823756701
<b>7,5-es méret</b>	823756721
<b>8,0-as méret</b>	823756801
<b>8,5-es méret</b>	823756821
<b>9,0-es méret</b>	823756901

### MŰSZAKI ADATOK

<b>TÍPUS</b>	steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal	
<b>ANYAG</b>	Natúrlatex (NR)	
<b>SZÍN</b>	zöld	
<b>KESZTYŰFORMA</b>	teljesen anatómikus, göngyölt szárral	
<b>TELJES HOSSZ MÉRETEKÉNT</b> az EN 455-2 szerint	5 ½ 6, 6 ½ és 7 7 ½, 8, 8 ½ és 9	275 mm 280 mm 290 mm
<b>FALVASTAGSÁG</b> a tenyérrészen, egyszer mérve	min. 0,2 mm	
<b>VÍZHATLANSÁG</b> az EN 455-1 szerint	AQL 1,0	
<b>SZAKADÁS</b> az EN 455-2 szerint	≥ 12 N	
<b>FELHASZNÁLHATÓSÁG</b> Eredeti csomagolásban a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tárolás esetén	min. 3 év	
<b>STERILIZÁLÁS</b>	Gamma sugárzás minimum 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>CSOMAGOLÁS</b>	jobb és bal kesztyű szárával rostmentes belső zsebbe tűrve, légmentesen, lezárt egészségügyi tasakban Sterilitás jelzővel ellátott adagolódobozban: 40 pár Sterilitás jelzővel ellátott szállítókartonban: 240 pár	

**SEMPERMED DERMA PF** – A gazdaságos alternatíva érzékeny kezekre optimális tapintásérzetel és biztos műszerkezeléssel kombinálva nyújt jobb fogást.



### FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

- Púdermentes és igen bőrbarát
- Könnyen felhúzható
- Biztos műszerkezelés az optimális fogásnak köszönhetően
- Anatómikusan tökéletes forma széles és kényelmes kézfejjel és természetesen behajló ujjformával

### CIKKSZÁMOK

<b>5,5-es méret</b>	822751522
<b>6,0-os méret</b>	822751602
<b>6,5-es méret</b>	822751622
<b>7,0-es méret</b>	822751702
<b>7,5-es méret</b>	822751722
<b>8,0-as méret</b>	822751802
<b>8,5-es méret</b>	822751822
<b>9,0-es méret</b>	822751902

### MŰSZAKI ADATOK

<b>TÍPUS</b>	steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal	
<b>ANYAG</b>	Natúrlatex (NR)	
<b>SZÍN</b>	természetes fehér	
<b>KESZTYŰFORMA</b>	teljesen anatómikus, göngyölt szárral	
<b>TELJES HOSSZ MÉRETEKÉNT</b> az EN 455-2 szerint	5 ½, 6 és 6 ½ 7, 7 ½ és 8 8 ½ és 9	265 mm 275 mm 280 mm
<b>FALVASTAGSÁG</b> a tenyérrészen, egyszer mérve	0,19 - 0,25 mm	
<b>VÍZHATLANSÁG</b> az EN 455-1 szerint	AQL 1,5	
<b>SZAKADÁS</b> az EN 455-2 szerint	≥ 12 N	
<b>FELHASZNÁLHATÓSÁG</b> Eredeti csomagolásban a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tárolás esetén	min. 3 év	
<b>STERILIZÁLÁS</b>	Gamma sugárzás minimum 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>CSOMAGOLÁS</b>	jobb és bal kesztyű szárával rostmentes belső zsebbe tűrve, légmentesen, lezárt egészségügyi tasakban Sterilitás jelzővel ellátott adagolódobozban: 50 pár Sterilitás jelzővel ellátott szállítókartonban: 300 pár	

**SEMPERMED DERMA PLUS** –A speciálisan kifejlesztett duplamerítéses eljárással készült sebészeti kesztyűk könnyen felhúzhatók és 1-es AQL-értékkel rendelkeznek.



### FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

- Nagy szakítószilárdság és megbízható vízhatlanság a duplamerítéses gyártási eljárásnak köszönhetően
- A mikroérdes felszíni textúra tökéletes fogást biztosít - nedves környezetben is
- Anatómikusan tökéletes forma széles és kényelmes kézfejjel és természetesen behajló ujjformával

### CIKKSZÁMOK

<b>6,0-es méret</b>	823152609
<b>6,5-es méret</b>	823152629
<b>7,0-es méret</b>	823152709
<b>7,5-es méret</b>	823152729
<b>8,0-as méret</b>	823152809
<b>8,5-es méret</b>	823152829
<b>9,0-es méret</b>	823152909

### MŰSZAKI ADATOK

<b>TÍPUS</b>	steril sebészeti kesztyű, enyhén púderezett	
<b>ANYAG</b>	Natúrlatex (NR)	
<b>PÜDER</b>	tisztá kukoricakeményítő	
<b>SZÍN</b>	természetes fehér	
<b>KESZTYŰFORMA</b>	teljesen anatómikus, göngyölt szárral	
<b>TELJES HOSSZ MÉRETENKÉNT</b> az EN 455-2 szerint	6 és 6 ½ 7 és 7 ½ 8, 8 ½ és 9	270 mm 280 mm 285 mm
<b>FALVASTAGSÁG</b> a tenyérrészen, egyszer mérve	0,19 - 0,24 mm	
<b>VÍZHATLANSÁG</b> az EN 455-1 szerint	AQL 1,0	
<b>SZAKADÁS</b> az EN 455-2 szerint	≥ 12 N	
<b>FELHASZNÁLHATÓSÁG</b> Eredeti csomagolásban a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tárolás esetén	min. 5 év	
<b>STERILIZÁLÁS</b>	Gammásugárzás minimum 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>CSOMAGOLÁS</b>	jobb és bal kesztyű szárával rostmentes belső zsebbe tűrve, légmentesen, lezárt egészségügyi tasakban Sterilitás jelzővel ellátott adagolódobozban: 50 pár Sterilitás jelzővel ellátott szállítókartonban: 300 pár	

**SEMPERMED CLASSIC NEXT GENERATION** –Klasszikus púderezett sebészeti kesztyű optimalizált termékjellemzőkkel - standard helyzetekre



### FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

- Az állandó anyagvastagság az ujjaktól egészen a szárig elősegíti a műszerek precíz használatát
- Optimális biztonság
- Tökéletes műszerkezelés
- Enyhén púderezett, könnyen felhúzható
- Többszörösen átmosva

### CIKKSZÁMOK

<b>6,0-es méret</b>	826054600
<b>6,5-es méret</b>	826054620
<b>7,0-es méret</b>	826054700
<b>7,5-es méret</b>	826054720
<b>8,0-as méret</b>	826054800
<b>8,5-es méret</b>	826054820
<b>9,0-es méret</b>	826054900

### MŰSZAKI ADATOK

<b>TÍPUS</b>	steril sebészeti kesztyű, enyhén púderezett	
<b>ANYAG</b>	Natúrlatex (NR)	
<b>SZÍN</b>	természetes fehér	
<b>KESZTYŰFORMA</b>	teljesen anatómikus, göngyölt szárral	
<b>TELJES HOSSZ MÉRETENKÉNT</b> az EN 455-2 szerint	6 és 6 ½ 7, 7 ½ és 8 8 ½ és 9	260 mm 270 mm 280 mm
<b>FALVASTAGSÁG</b> a tenyérrészen, egyszer mérve	0,15 - 0,20 mm	
<b>VÍZHATLANSÁG</b> az EN 455-1 szerint	AQL 1,5	
<b>SZAKADÁS</b> az EN 455-2 szerint	≥ 12 N	
<b>FELHASZNÁLHATÓSÁG</b> Eredeti csomagolásban a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tárolás esetén	min. 5 év	
<b>STERILIZÁLÁS</b>	Gammásugárzás minimum 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>CSOMAGOLÁS</b>	Steril csomagolási egység: jobb és bal kesztyű szárával rostmentes belső zsebbe tűrve, légmentesen, lezárt egészségügyi tasakban Sterilitás jelzővel ellátott adagolódobozban: 60 pár Sterilitás jelzővel ellátott szállítókartonban: 360 pár Nagyméretű csomagolás - nem steril: 500 bal és 500 jobb kesztyű, csomagolás nélkül, egyenként 500-as PE-zsákban, szállítókarton nélkül csomagolva.	

ÁTTEKINTÉS

# SEBÉSZETI KESZTYŰK A SEMPERMED-TŐL



	sempermed <sup>®</sup> syntegra IR	sempermed <sup>®</sup> senso	sempermed <sup>®</sup> supreme	sempermed <sup>®</sup> supreme+
<b>TÍPUS</b>	steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal	vékony, steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal	steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal	steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal
<b>ANYAG</b>	szintetikus poli-izoprén	natúrlatex (NR)	natúrlatex (NR)	natúrlatex (NR)
<b>SZÍN</b>	krémszínű	barna	természetes fehér	természetes fehér
<b>FALVASTAGSÁG</b> a tenyérrészen egyszer mérve	0,19 - 0,24 mm	0,14 - 0,18 mm	0,19 - 0,24 mm	0,19 - 0,24 mm
<b>SZAKADÁS</b> az EN 455-2 szerint	≥ 9 N	≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N



	sempermed <sup>®</sup> GREEN M	sempermed <sup>®</sup> DERMA PF	sempermed <sup>®</sup> DERMA plus	sempermed <sup>®</sup> CLASSIC next generation
<b>TÍPUS</b>	steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal	steril sebészeti kesztyű, púdermentes, szintetikus belső bevonattal	steril sebészeti kesztyű, enyhén púderezett	steril sebészeti kesztyű, enyhén púderezett
<b>ANYAG</b>	natúrlatex (NR)	natúrlatex (NR)	natúrlatex (NR)	natúrlatex (NR)
<b>SZÍN</b>	zöld	természetes fehér	természetes fehér	természetes fehér
<b>FALVASTAGSÁG</b> a tenyérrészen egyszer mérve	min. 0,2 mm	0,19 - 0,25 mm	0,19 - 0,24 mm	0,15 - 0,20 mm
<b>SZAKADÁS</b> az EN 455-2 szerint	≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.  
Division Sempermed  
1031 Wien (Bécs) · Modecenterstraße 22  
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630  
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com

**sempermed<sup>®</sup>**  
A MEMBER OF THE SEMPERIT-GROUP