


GUANTO MICROCHIRURGICO SEMPERMED SENSO

Un colore che assorbe la luce

Il colore bruno di questo guanto in Lattice senza polvere, riduce gli intensi riflessi della luce nel corso degli interventi chirurgici in sala operatoria, agevolando l'adattamento della vista durante delicati interventi

Ideale sensibilità al tatto

I guanti chirurgici extra sottili Sempermed Senso consentono movimenti precisi in situazioni nelle quali sia richiesta la massima sensibilità, soprattutto al tatto, per una migliore sicurezza. Questa viene garantita da una distribuzione omogenea dello spessore, che dà la sensazione di indossare una seconda pelle.

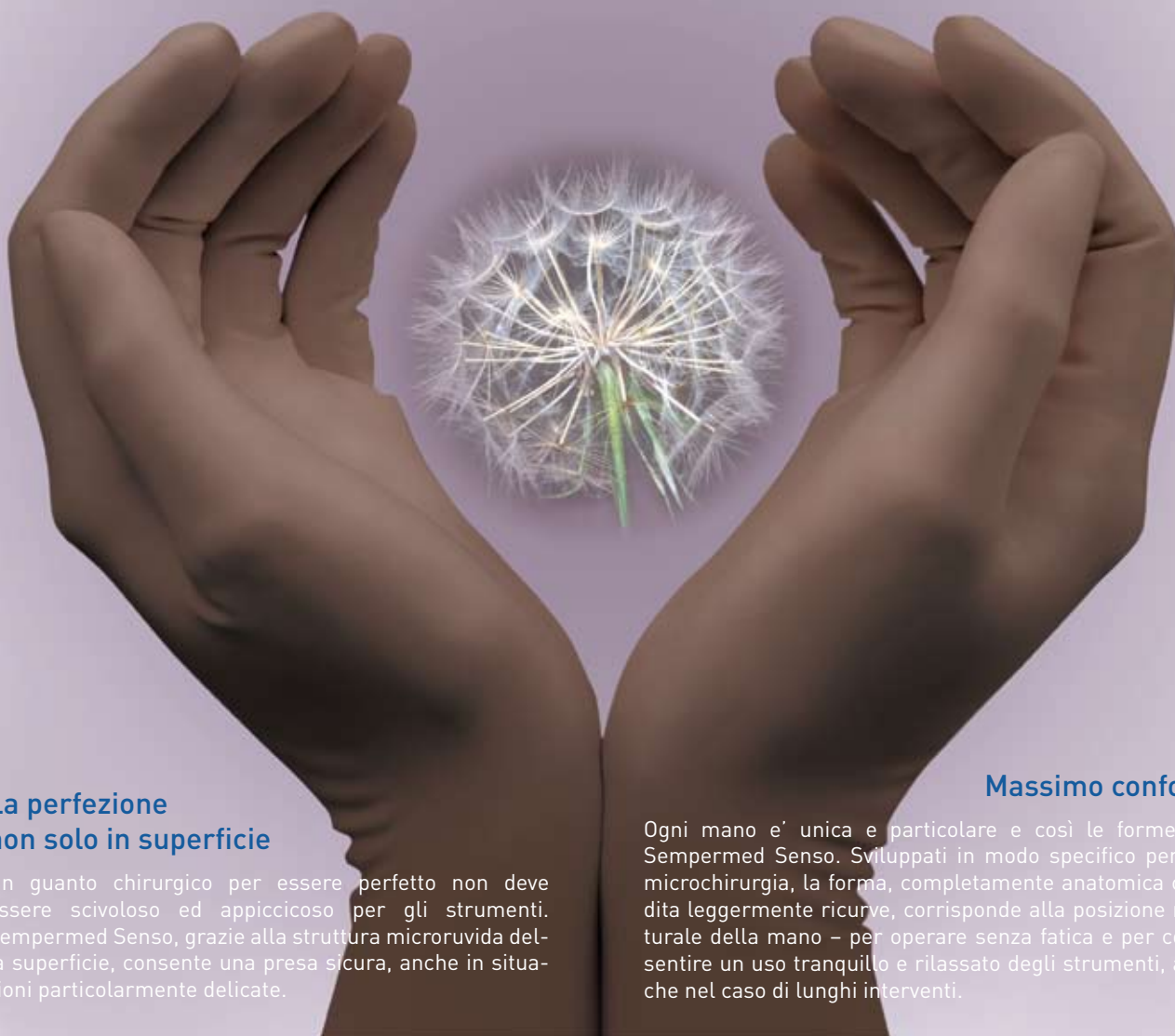

La perfezione non solo in superficie

Un guanto chirurgico per essere perfetto non deve essere scivoloso ed appiccicoso per gli strumenti. Sempermed Senso, grazie alla struttura microruvida della superficie, consente una presa sicura, anche in situazioni particolarmente delicate.

Massimo confort

Ogni mano è unica e particolare e così le forme di Sempermed Senso. Sviluppati in modo specifico per la microchirurgia, la forma, completamente anatomica con dita leggermente ricurve, corrisponde alla posizione naturale della mano – per operare senza fatica e per consentire un uso tranquillo e rilassato degli strumenti, anche nel caso di lunghi interventi.

sempermed[®] 

senso

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

DATI TECNICI



sempermed®  **senso**

MODELLO	guanto chirurgico sterile, senza polvere, con rivestimento interno sintetico			
MATERIALE	lattice naturale (NR)			
COLORE	bruno			
FORMA DEL GUANTO	completamente anatomica con bordino arrotolato			
LUNGHEZZA TOTALE / MISURA in base a EN 455-2	5 ½	250 mm	6, 6 ½, 7, 7 ½	280 mm
SPESSORE strato singolo nella zona del palmo	0,14 - 0,18 mm			
DENSITA' in base a EN 455-1	AQL 1,0			
RESISTENZA AGLI STRAPPI in base a EN 455-2	≥ 12 N			
CONSERVABILITA' in confezione originale in base a DIN 7716, ISO 2230	min. 3 anni			
STERILIZZAZIONE	con raggi gamma min. 2,5 Mrad (25 kGy)			
CONFEZIONI	guanto sinistro e destro rovesciati, in tasca interna senza fibre, impenetrabile all'ozono, sigillati in buste medicali piatte In dispenser con indicatore della sterilizzazione: 50 paia In cartone pronto per la spedizione con indicatore della sterilizzazione: 300 paia			
NUMERO ARTICOLO	Misura 5,5	821751521	Misura 7,5	821751721
	Misura 6,0	821751601	Misura 8,0	821751801
	Misura 6,5	821751621	Misura 8,5	821751821
	Misura 7,0	821751701	Misura 9,0	821751901
CONTRASSEGNO	EN 1041, EN 980, ISO 15223			

CI CONTATTI!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
1031 Wien · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com