



Per le
migliori mani.

Nomen est omen.

Il pezzo forte del nostro reparto sviluppi è Sempermed Supreme, perfettamente adatto ad ogni vostra esigenza.

Massima sicurezza – massimo confort.
Per prestazioni massime. Ogni giorno.

sempermed[®] 

supreme

Designed around your hands.

L'attrito dipende dalla resistenza incontrata

Facili da indossare

Un segreto ben custodito

Il rivestimento interno, sintetico, che facilita la calzatura di Sempermed Supreme, è il risultato di anni di lavoro. La struttura del rivestimento è brevettata.



La struttura a rete del rivestimento interno:
poco attrito => calzata facile

INFORMAZIONI



Vestibilità dei guanti sovrapposti

In caso di sollecitazioni estreme o con pazienti a rischio, indossare due paia di guanti sovrapposti offre una sicurezza massima. Sempermed Supreme consente di indossare due paia di guanti, uno sull'altro, senza problemi, conservando una sensibilità al tatto molto buona. Consiglio: in caso di due misure diverse, indossare prima il paio più grande. Oppure utilizzare misure uguali.

Il sistema di rivestimento

È facile spiegare perché i Sempermed Supreme sono così facili da indossare. Lo strato interno non ha una superficie liscia, ma una struttura speciale a forma di rete. In questo modo la superficie del film a contatto con la pelle viene ottimizzata, riducendo notevolmente la resistenza all'attrito quando si indossa il guanto. La struttura offre una piacevole sensazione vellutata sulla pelle.

Il cambio dei guanti intraoperatorio

In base agli studi effettuati, il 24-37% dei guanti chirurgici dopo l'uso evidenzia perforazioni (World J. Surg., 1999). Tuttavia, in caso di interventi di durata maggiore, anche il sudore che si forma fra la superficie cutanea e il guanto causa un rigonfiamento della pellicola protettiva del guanto. Per questo motivo, Sempermed raccomanda di sostituire regolarmente i guanti durante gli interventi. Lo speciale rivestimento interno di Sempermed Supreme semplifica la calzatura in ambiente "umido".

Sensibilità per prestazioni massime.

Sensibilità al tatto ideale

Sicurezza ottimale

Il vostro lavoro richiede la massima sensibilità, movimenti di precisione e sensibilità al tatto ottimale. Il fattore decisivo per ottenere la massima sicurezza, conservando un'eccellente sensibilità, è lo spessore



Come una seconda pelle

Grazie alla sua resistenza, lo spessore di Sempermed Supreme è talmente ridotto da non limitare neppure un po' la sensibilità al tatto, garantendo tuttavia la massima sicurezza. E' come una seconda pelle, quasi impercettibile. E cosa veramente importante, consente di indossare due paia di guanti sovrapposti senza problemi

**Sempermed Supreme,
la sicurezza della ricerca
a portata di mano**

Veste perfettamente.

Massimo confort

Le vostre mani sono la misura di ogni cosa

Ogni mano è unica. Come la forma di Sempermed Supreme. Sviluppata espressamente per le esigenze della sala operatoria, la forma completamente anatomica, con le dita piegate, corrisponde alla natura posizione rilassata della mano.

Parte terminale sicura

Il polsino conico è stato adattato all'anatomia dell'articolazione della mano e il bordino arrotolato consente una chiusura sicura sopra al camice.



Lavorare senza affaticarsi

La posizione rilassata delle mani è stata studiata per garantire un lavoro senza fatica, indossando Sempermed Supreme, l'uso degli strumenti, anche negli interventi più lunghi, sarà fermo e sicuro. A ciò contribuisce anche il dorso extra largo del guanto.

Per il benessere della pelle

Il trattamento Semperit per il benessere della pelle.

Sempermed ha sviluppato una particolare procedura di trattamento automatico, durante la quale i guanti vengono lavati diverse volte in modo intensivo. Ciò consente di ridurre al minimo, per quanto tecnicamente possibile, la presenza di sostanze irritanti per la pelle e il contenuto di proteine del lattice naturale.



Una presa sicura per una sensazione di sicurezza.

Uso perfetto degli strumenti


La superficie speciale

Un guanto chirurgico non deve essere scivoloso. Ma gli strumenti non devono neppure rimanere "appiccicati" alle dita. E' necessario adottare la giusta via di mezzo. Sempermed Supreme grazie alla sua superficie microruvida consente una presa specifica.



La base crea la forma, l'extra deriva dalla chimica.

I presupposti per una presa perfetta derivano dalla superficie della forma in porcellana. Questa non deve essere né troppo liscia né troppo ruvida. La superficie delle forme a immersione di Sempermed Supreme è microruvida e consente la massima presa. Grazie al trattamento chimico della superficie, questa viene ulteriormente ottimizzata.

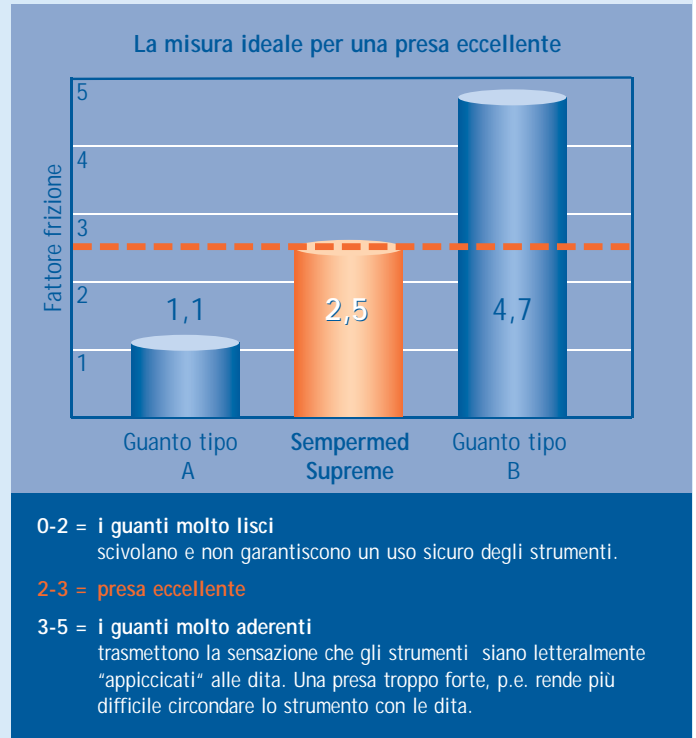

Il "Coefficiente di attrito Sempermed"

Sempermed mediante ricerche e test intensivi ha determinato – con riferimento a Sempermed Supreme - un "coefficiente di attrito" che ha consentito di registrare una performance ottimale in fatto di presa durante l'impiego in sala operatoria. Il coefficiente di attrito indica la resistenza all'attrito, determinata mediante trazione della pellicola del guanto su una superficie metallica levigata.

INFORMAZIONI

L'eccezionale performance di Sempermed Supreme deriva dalla combinazione di presa perfetta e sensibilità al tatto ottimale

Sempermed

Oltre 85 anni di know-how nello sviluppo e nella produzione di guanti per le massime esigenze mediche

- n con la competenza di un produttore europeo
- n vicino al mercato
- n che offre servizi in loco



Contattateci!

Semperit Technische Produkte GmbH & Co KG
Division Sempermed · 1031 Vienna · Modecenterstraße 22
Tel: +43 1 79 777 520 · Fax: +43 1 79 777 630
e-mail: sempermed@semperit.at

Descrizione del prodotto

Tipo	guanto chirurgico sterile, senza polvere, con rivestimento interno sintetico	
Materiale	lattice naturale (NR)	
Colore	bianco	
Forma del guanto	completamente anatomica con bordino arrotolato	
Lunghezza totale/misura in base a EN 455-2	5 1/2, 6 e 6 1/2 7 e 7 1/2 8, 8 1/2 e 9	270 mm 280 mm 285 mm
Spessore strato singolo nella zona del palmo	0,19 - 0,24 mm	
Impermeabilità in base a EN 455-1	AQL 1,0	
Resistenza meccanica in base a EN 455-2	≥ 12 N	
Conservabilità nella confezione originale con immagazzinaggio in base a DIN 7716, ISO 2230	minimo 3 anni	
Sterilizzazione	con raggi gamma min. 2,5 Mrad (25 kGy)	
Confezioni	guanto sinistro e destro rovesciati, in tasca interna senza fibre, impenetrabile all'ozono, sigillati in buste mediche piatte In dispenser con indicatore sterilizzazione: 50 paia In cartone pronto per la spedizione con indicatore sterilizzazione 300 paia	
Contrassegno	EN 1041 + EN 980	

