




NATUUR
LATEX
VRIJ

EEN NIEUWE GENERATIE SYNTHETISCHE HANDSCHOENEN –

LATEXEIGENSCHAPPEN ZONDER LATEXALLERGIE!

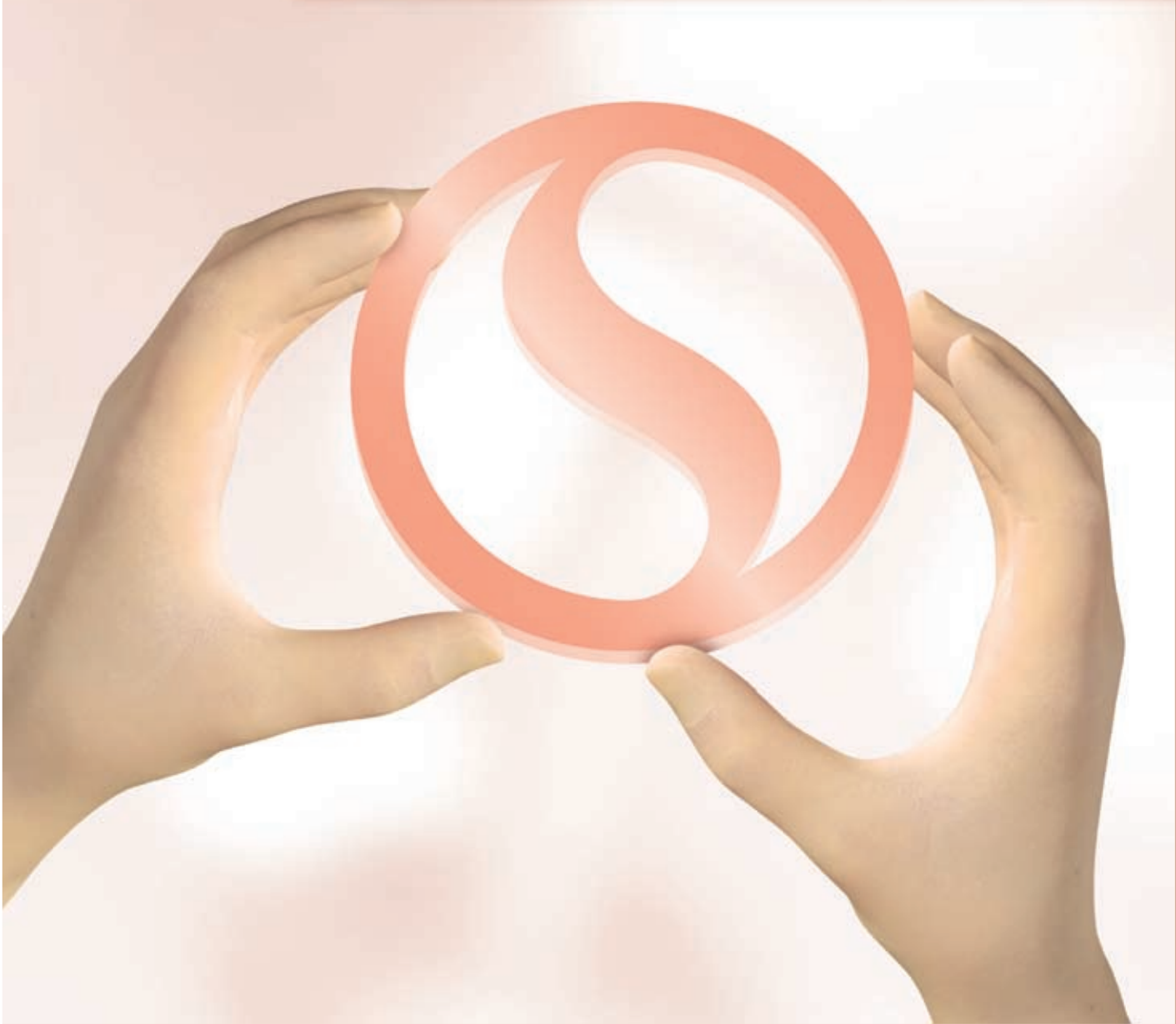

sempermed[®]  **syntegra IR**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

SEMPERMED SYNTEGRA IR

EEN NIEUWE GENERATIE SYNTHETISCHE HANDSCHOENEN

De innovatie in de operatiekamer: synthetisch polyisopreen (IR).
Schittert met dezelfde fysische eigenschappen als natuurlijk latex:
hoogste elasticiteit en treksterkte, bij geringe spanning.

DE LATEXALLERGIE- PROFYLAXE

van synthetisch polyisopreen

De Sempermed Syntegra IR ontziet zowel arts als patiënt:

- poedervrij
- natuurlijk latexvrij
- vrij van allergene proteïnes.

Hierdoor wordt het gevaar van sensibilisering bij voorbaat uitgeschakeld –
in het bijzonder voor atopici.



GEOTROOIEERDE TECHNOLOGIE – EENVOUDIG AAN TE TREKKEN

Het coatingsysteem en de mogelijkheid van dubbel aantrekken



OPTIMAAL COMFORT

dankzij perfecte, volledig anatomische pasvorm



OPTIMALE VEILIGHEID

Voor de beste grip



OVERTUIGENDE TECHNOLOGIE

MET INNOVATIEF PROCESVERSNELSYSTEEM



De Sempermed Syntegra IR kan dankzij het zachte, elastische materiaal in iedere situatie makkelijk en snel worden aangetrokken.

Waarom de handschoenen zo gemakkelijk aan te trekken zijn is snel uitgelegd: de inwendige coating vormt geen glad oppervlak, maar beschikt over een speciale netwerkstructuur waardoor de wrijvingsweerstand bij het aantrekken aanzienlijk wordt gereduceerd. De structuur zorgt voor een aangenaam gevoel op de huid. Bij bijzonder hoge belasting of bij risicopatiënten bieden twee handschoenen over elkaar een maximum aan veiligheid.

De Sempermed operatiehandschoenen garanderen probleemloos dubbel aantrekken, bij nog altijd buitengewoon goed tastgevoel.

De volledig anatomische vorm met de licht gekromde vingers, speciaal ontwikkeld voor de vereisten van de operatiekamer, beantwoordt aan de natuurlijke ontspannen houding van de hand. Deze ontspannen handhouding waarborgt dat u met de Sempermed Syntegra IR kunt werken zonder vermoeid te raken – en dat het hanteren van uw instrumenten ook bij langere operaties ontspannen, rustig en veilig blijft. Een essentiële bijdrage hiertoe levert ook de extra brede handrug.

Een veilige afsluiting

De conische manchet is aangepast aan de anatomie van de pols en vormt met zijn rolrand een veilige afsluiting met de operatiejas.

Het microgeruwde oppervlak garandeert een optimale grip. Voor een perfecte hantering van instrumenten – ook in een vochtig milieu. De ideale combinatie – een innoverend materiaal met het beproefde Sempermed design – voor een zelfde tastgevoel als bij natuurlijk latex.

De uit onderzoek verkregen optimale gelijkmatige wanddikteverdeling is bij de ontwikkeling van de nieuwe Sempermed Syntegra IR toegepast, waardoor het tastgevoel duidelijk werd verbeterd, bij gelijktijdig geoptimaliseerde veiligheid.

De Sempermed Syntegra IR is wereldwijd één van de eerste polyisopreen-handschoenen waarbij een innoverend procesversnelsysteem (speciale dithiocarbamaten en xanthogenaten, d.w.z. additieven die bij de handschoenproductie verantwoordelijk zijn voor de netwerkstructuur van het materiaal) wordt toegepast. Het eminente voordeel in tegenstelling tot het in de handel gebruikelijke procesversnelsystemen is de duidelijk verbeterde huidvriendelijkheid dankzij een geringer allergiepotentieel van de versnellers in de handschoen.

TECHNISCHE GEGEVENS



sempermed® syntegra IR

TYPE	steriele operatiehandschoen, poedervrij, met synthetische binnencoating			
MATERIAAL	synthetisch polyisopreen			
KLEUR	crème			
HANDSCHOENVORM	volledig anatomisch met rolrand			
TOTALE LENGTE/MAAT overeenkomstig EN 455-2	5 ½, 6 en 6 ½	270 mm	7, 7 ½ en 8	280 mm
	8 ½ en 9	285 mm		
WANDDIKTE in de handpalm enkelvoudig gemeten	0,19 - 0,24 mm			
DICHTHEID volgens EN 455-1	AQL 1,0			
TREKSTERKTE volgens EN 455-2	≥ 9 N			
HOUDBAARHEID in originele verpakking bij opslag overeenkomstig DIN 7716, ISO 2230	minstens 3 jaar			
STERILISATIE	gammabestraling met minstens 2,5 Mrad (25 kGy)			
VERPAKKING	linker en rechter handschoen met omgeslagen manchet in pluisvrije binnenenveloppe, ozondicht, ingeseald in medische peel open-folieverpakking In dispenserdoos met sterilisatie-indicator: 40 paar In verzenddoos met sterilisatie-indicator: 240 paar			
ARTIKELNUMMERS	Maat 5,5	827056521	Maat 7,5	827056721
	Maat 6,0	827056601	Maat 8,0	827056801
	Maat 6,5	827056621	Maat 8,5	827056821
	Maat 7,0	827056701	Maat 9,0	827056901
ETIKETTERING	EN 1041 en EN 980			

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Semperit Technische Produkte GmbH Division Sempermed
1031 Wien · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com