



För händernas bästa

Namnet säger allt

Sempermed Supreme, ett mästerverk från vår utvecklingsavdelning, är perfekt anpassad för dina behov.

Högsta säkerhet – högsta komfort.

För topprestationer – varje dag.

sempermed[®] 

supreme

Designed around your hands.

Friktion är en fråga om motstånd

Lätt att ta på

En väl bevarad hemlighet

Det syntetiska innerskiktet underlättar påtagning och det är resultatet av flera års utveckling. Skiktets struktur är patenterat.



Innerskiktets ytstruktur:
Mindre friktion => Lätt att dra på

Innerskiktet

Det är lätt att förklara att Sempermed Supreme är lätt att ta på. Innerskiktet är inte en glatt yta utan det har en nätliknande ytstruktur. Därigenom optimeras skiktets kontaktyta med huden och därmed minskas friktionen vid påtagningen avsevärt. Strukturen ger också en angenäm, sammetsliknande känsla i kontakt med huden.

Handskbyte mellan operationer

Enligt utförda undersökningar uppvisar kirurghandskar efter operation hål i 24-37% av fallen (World J. Surg., 1999). Vid längre användning medför svettningen mellan huden och handsken att det skyddande handskskiktet gradvis sväller. Sempermed rekommenderar därför att man byter handskar under långa operationer. Sempermed Supremes speciella innerskikt förenklar avsevärt ett förnyat pådragande av den nya handsken genom dess förmåga att klara av fukt.



Dubbla handskar

Vid särskilt höga krav eller vid behandling av riskpatienter kan dubbla handskar ge en maximal säkerhet. Sempermed Supreme garanterar att man problemfritt kan använda dubbla handskar och ändå behålla god taktilitet genom de båda handskarna. Rekommendation: Om handskarna är av olika storlek, dra först på den större storleken.

Fingertoppskänsla medför toppprestationer

Idealisk känslighet

Optimal säkerhet

Du arbetar i ett mycket känsligt område där det krävs precis finmotorik och känslighet. Den avgörande faktorn för största möjliga säkerhet och samtidigt bästa känslighet utgörs av handskens tjocklek.



Som en andra hud

Genom sin styrka har tjockleken hos Sempermed Supreme kunnat reduceras så långt att din känslighet inte blir lidande. Det känns som en andra knappt märkbar hud. När det verkligen blir allvar, kan du dra nytta av möjligheten att dra på dubbla handskar.

**Med Sempermed Supreme har du all den säkerhet,
som Sempermedforskningen byggt upp,
i din egen hand**

Passar perfekt

Bästa passform

Din hand är måttstocken

Din hand är något enastående, liksom Sempermed Supremes form. Handsken motsvarar den fullständiga anatomiska utformningen med böjda fingrar som motsvarar en hand i vila.

En säker omslutning

Det koniska skaftet är anpassat till handleden och bildar med sin rullkant en säker omslutning runt rockärmen



Arbeta utan att bli trött

Den fullständiga anatomiska utformningen och handskens breda handrygg minskar trötthetskänslan vilket medför en lugn, avspänd och säker instrumenthantering; speciellt viktigt vid långa operationer.

För din huds bästa

Absolut hudvänlig – Semperits efter- behandlingsförfarande

Sempermed förfogar över ett specialutvecklat automatiskt efterbehandlingsförfarande, där handskarna intensivt tvättas ett flertal gånger. Hudirriterande ämnen från tillverkningsprocessen och naturlatexproteinhalten reduceras därmed till ett tekniskt minimum.



Säkert grepp ger säker känsla.

Perfekt Instrumenthantering


Den speciella ytan

En perfekt operationshandske får absolut inte vara hal. Instrumenten får heller inte formligen fastna i fingrarna. Här handlar det om att ligga precis rätt. Sempermed Supreme har genom sin strukturerade och mikroruggade yta en alldeles speciell greppförmåga.



Grunden får man av dess form, finpoleringen av kemin

Förutsättning för ett perfekt grepp är porslinsformens yta. Den får inte vara för glatt eller för skrovlig. Porslinsformarna för Sempermed Supreme är mikroruggade och ger därmed idealisk greppförmåga. Genom den kemiska ytbehandlingen optimeras greppet ytterligare.

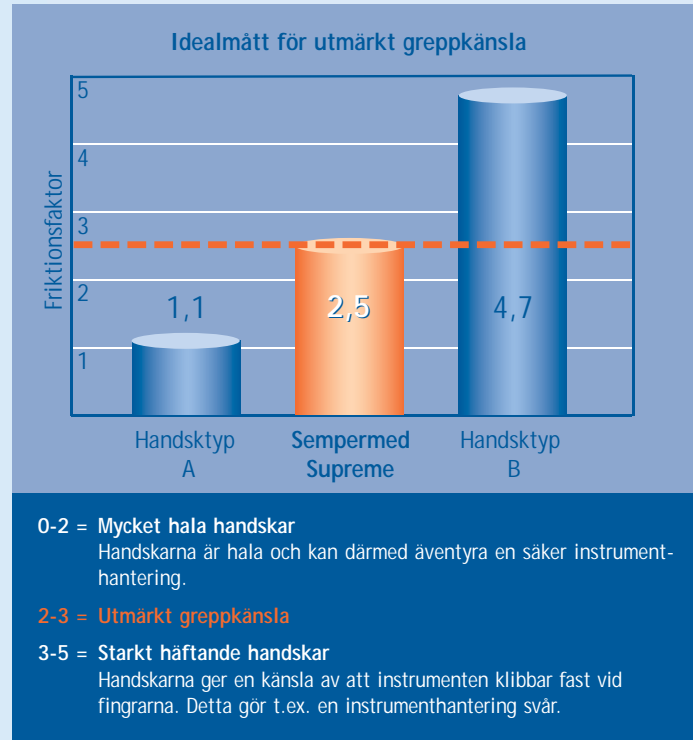

“Sempermeds friktionsfaktor”

Under utvecklings- och testarbete upptäcktes en friktionsfaktor, som ger Sempermed Supreme ett optimalt grepp i praktiskt arbete. Friktionsfaktorn anger motståndet, och detta bestäms genom att dra en handskfilm över en polerad metallyta.

INFO

Sempermed Supremes fantastiska egenskaper ger en kombination av perfekt grepp och optimal känslighet.

Sempermed

Sempermed har mer än 85 års know-how av utveckling och produktion av handskar för högsta medicinska krav

- Kompetens hos en europeisk tillverkare
- Närhet till marknaden
- Service nära kunden

Kontakta oss gärna!

Semperit Technische Produkte GmbH & Co KG
Division Sempermed · 1031 Wien · Modecenterstraße 22
Tel: +43 1 79 777 520 · Fax: +43 1 79 777 630
e-mail: sempermed@semperit.at



SelefaTrade AB
Tel. 08-621 36 80 · Fax 08-761 80 02
e-mail: post@selefa.se



Produktbeskrivning

Typ	Steril operationshandske, puderfri, med syntetiskt innerskikt	
Material	Naturlatex (NR)	
Färg	Vit	
Form	Helt anatomisk utformning med rullkant	
Total längd/storlek enligt EN 455-2	5 1/2, 6 och 6 1/2 7 och 7 1/2 8, 8 1/2 och 9	270 mm 280 mm 285 mm
Tjocklek Handflata - enkelvägg	0,19 - 0,24 mm	
Täthet enligt EN 455-1	AQL 1,0	
Brottgräns enligt EN 455-2	≥ 12 N	
Lagring i originalförpackning vid lagring enligt DIN 7716, ISO 2230	Minst 3 år	
Sterilisering	Gammastrålning med minst. 2,5 Mrad (25 kGy)	
Förpackning	Vänster och höger handske upp och nervänt förpackade, i fiberfri innerpåse, ozontät, förseglade i för medicinska ändamål godkänd plan påse Innerförpackning med steriliseringsindikator: 50 par Transportförpackning med steriliseringsindikator: 300 par	
Märkning	EN 1041 + EN 980	