


**NATURAL
LATEX
FREE**

UUDEN SUKUPOLVEN SYNTEETTINEN LEIKKAUSKÄSINE –

**LUONNONKUMIN OMINAISUUDET
ILMAN LUONNONKUMIALLERGIAA**

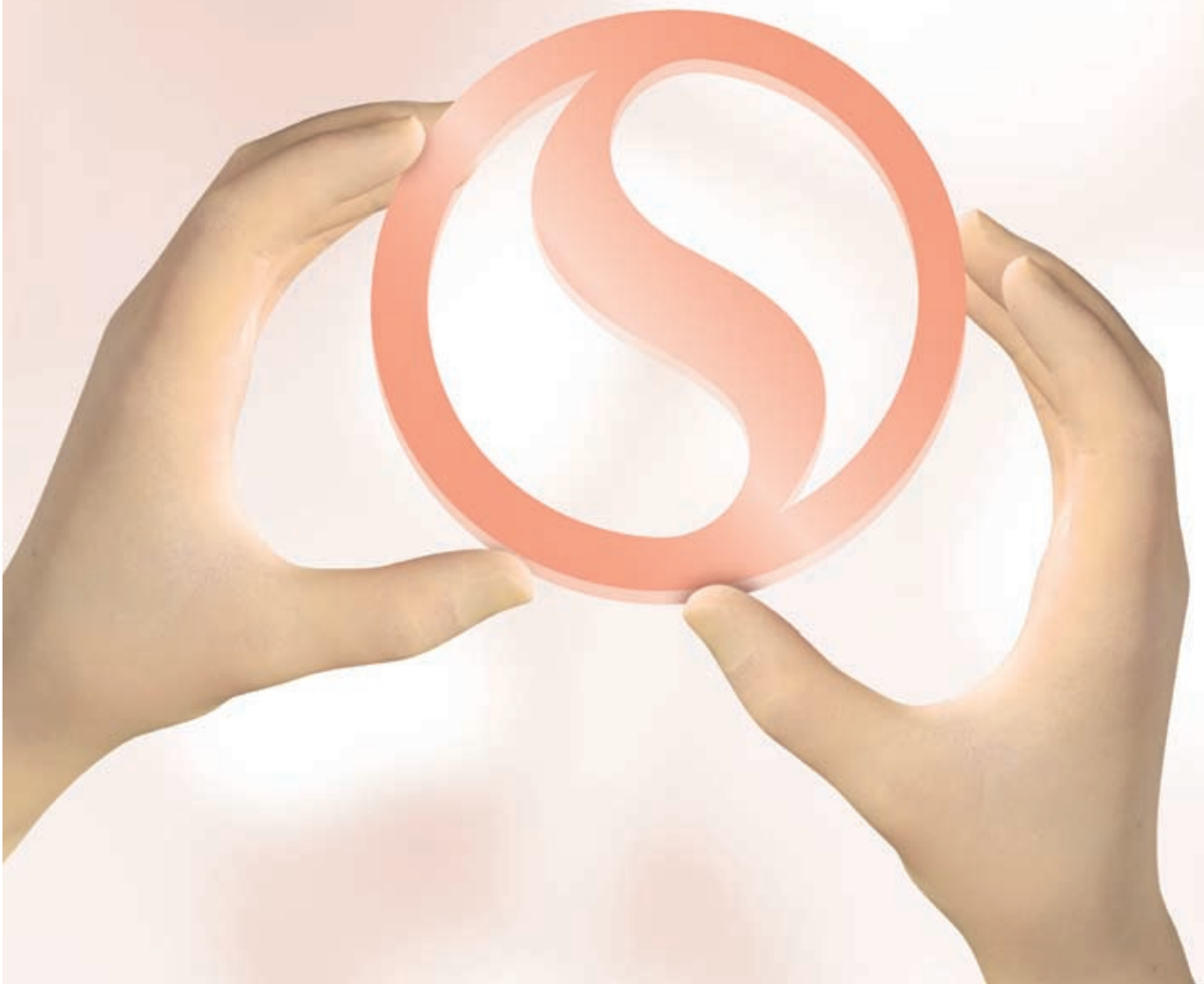

sempermed®  **syntegra IR**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

SEMPERMED SYNTEGRA IR

UUDEN SUKUPOLVEN SYNTEETTINEN LEIKKAUSKÄSINE

Innovaatiota leikkaussaliin;

Synteettinen polyisopreeni (IR). Materiaalilla on samat erinomaiset fyysiset ominaisuudet kuin luonnonkumilla: maksimaalinen elastisuus ja repäisyjuuus.

LUONNONKUMIALLERGIAN PROFYLAKSIA

Valmistettu synteettisestä polyisopreenistä

Sempermed Syntegra IR -käsine suojaa sekä terveydenhoidon työntekijää että potilasta

- puuteriton
- ei sisällä luonnonkumia
- ei sisällä allergiaa aiheuttavia proteiineja

Poistaa herkistymisriskin alusta lähtien – erityisesti atooppisilta henkilöiltä.



PATENTOITU TEKNOLOGIA - HELPPO PUKEA

Sisäpinnoite ja tuplapukeminen



MAKSIMIMUKAVUUS

Täysanatominen muoto



OPTIMISUOJAA

Erinomaisen hyvä pito



VAKUUTTAVA TEKNOLOGIA

Innovatiivinen kiihdytinjärjestelmä



Sempermed Syntegra IR on nopea ja helppo pukea joka tilanteessa.

Syntegra IR:n mainio puettavuus on käsineen sisäpinnan rakenteen ansiota. Se ei ole sileä vaan verkkomainen minkä ansiosta pukemisen aikainen kitka pienenee huomattavasti.

Erityisen hankalissa tilanteissa ja riskipotilaita käsiteltäessä kaksoispukeminen antaa parhaan suojan.

Sempermed-leikkauskäsineet takaavat helpon kaksoispukemisen ja hyvän tuntoherkkyyden.

Kehitetty erityisesti leikkaussalin vaatimuksiin. Täysanatominen muoto kaartuvine sormineen vastaa käden luonnollista ja levollista toiminta-asentoa.

Levollinen käden asento takaa sen, että Sempermed Syntegra IR -käsineitä käyttäessä voi työskennellä väsymättä myös pitkäkestoisissa leikkauksissa. Tätä edesauttaa myös käsineen erikoislevä kämmenselkä.

Käsineen kartiomainen ranneke vastaa ranteen anatomiaa, rullareunus helpottaa pukemista.

Mikrokarhennettu pinta takaa erinomaisen pidon, myös märkänä.

Ihanteellinen yhdistelmä – innovatiivinen materiaali yhdistettynä tuttuun testattuun Sempermed-muotoiluun – sama tuntoherkkyys kuin luonnonkumilla.

Sempermedin tutkimustyössään määrittelemä leikkauskäsineen ihannevahvuus on tuotu myös Syntegra IR -käsineeseen, tuloksena parantunut tuntoherkkyys yhdistyneenä maksimaaliseen turvallisuuteen.

Sempermed Syntegra IR on yksi maailman ensimmäisistä polyisopreenikäsineistä, jonka valmistuksessa on käytetty uutta innovatiivista menetelmää.

Sen etu verrattuna perinteisiin menetelmiin on käsineen merkittävästi parantunut ihoystävällisyys, sillä käytettyjen kiihdyttimien allergeenipotentiaali on merkittävästi aiemmin käytettyjä alempi.

TUOTEKUVAUS



sempermed® syntegra IR

TYYPPI	steriili leikkauskäsine, puuteriton, synteettinen sisäpinnoite
MATERIAALI	synteettinen polyisopreeni
VÄRI	kerma
KÄSINEEN MUOTO	täysin anatomisesti muotoiltu, varressa rullareuna
KÄSINEEN PITUUS/KOKO EN 455-2 mukaisesti	5 ½, 6 ja 6 ½ 270 mm 7, 7 ½ ja 8 280 mm 8 ½ ja 9 285 mm
PAKSUUS kämmenen alueella	0,19 - 0,24 mm
LÄPÄISEMÄTTÖMYYS EN 455-1 mukaisesti	AQL 1,0
MEKAANINEN LUJUUS EN 455-2 mukaisesti	≥ 9 N
KÄYTTÖKELPOISUUSAIKA alkuperäispakkauksessa, jos säilytys DIN 7716:n, ISO 2230 mukaisesti	vähintään 3 vuotta
STERILOINTI	gammasäteilytys vähintään 2,5 megaradia (25 kGy)
PAKKAUS	vasen ja oikea käsine käännettyinä kuiduttomassa sisätaskussa, otsonitiivis peel-open-pakkaus osastorasiassa jossa sterilointi-indikaattori: 40 paria kuljetuskartongissa jossa sterilointi-indikaattori: 240 paria
TUOTENUMEROT	Koko 5,5 827056521 Koko 7,5 827056721 Koko 6,0 827056601 Koko 8,0 827056801 Koko 6,5 827056621 Koko 8,5 827056821 Koko 7,0 827056701 Koko 9,0 827056901
PAKKAUSMERKINNÄT	EN 1041 + EN 980

YHTEYSTIEDOT

OneMed Oy

PL 11 · Rajatorpantie 41 B · 01641 Vantaa

Asiakaspalvelu puh. 020 445 3803 · faksi 020 445 4939

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed · 1031 Wien · Modecenterstraße 22 · www.sempermed.com