



za roke in pamet

sempercare® 



sempercare® S Medicinske

Za zdravniški pregled, zdravstveno nego in laboratorijsko delo ne potrebujemo sterilnih rokavic.

Medicinske rokavice sempermed se zaradi ploske oblike lahko nataknejo na desno ali na levo roko in imajo zaradi tega zelo ugodno ceno.

Sempermed je kot pionir kakovostnih rokavic izvozil evropsko znanje, sodobno tehnologijo in svojo ustaljeno prakso upravljanja kakovosti na Tajsko in v Hatyaiu ustanovil eno največjih proizvodnih enot. Svojevrsten strojni park zagotavlja nepretrgano svetovno razpoložljivost brez zamude v proizvodnem ciklusu.

sempercare® S edition

Rokavica iz naravnega lateksa z oprijemljivo površino in s sintetično notranjo oblogo, ki se prilagaja obliki vaše roke. Tudi za občutljivo kožo in brez pudra – kljub temu si jo zlahka nataknete.

sempercare® S latex

Rokavica iz naravnega lateksa brez obloge z gladko, teksturirano površino za zdravstveno nego.

sempercare® S nitrile

Sintetična alternativa za alergike tipa 1, ki je po občutku, prilagajanju obliki roke in oprijemljivosti skorajda enaka rokavicam iz naravnega lateksa.

sempercare® S vinyl

Sintetična rokavica za alergike tipa I + IV. Zelo varna za občutljivo kožo, čeprav se ne prilagaja tako prijetno obliki roke kot naravni lateks in nitril.




sempercare® nitrile



sempercare® vinyl




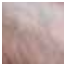


rokavice podjetja Sempermed

			
PRIMERJAVA MATERIALOV	NARAVNI LATEKS	NITRIL	VINYL
Udobnost	●	◐	○
Oprijemljivost	●	●	○
MEHANIČNA OBREMENLJIVOST			
Odpornost proti utrgu	●	●	○
Odpornost proti prebodu	◐	●	○
Raztegljivost	800 %	600 %	300 %
Migracija	●	●	○
Odpornost proti kemikalijam	odvisno od kemikalij		
PRIMERNOST ZA KOŽO			
Proteini	obstaja	ne obstaja	ne obstaja
Kemikalije	obstaja	obstaja	ne obstaja
Odstranjevanje odpada	●	◐	◐
Vonj	specifični vonj	specifični vonj	nevtralen
Cena	◐	○	●

● prednost ◐ povprečje ○ pomanjkljivost

Nesterilne medicinske rokavice **sempercare®**

Tehnični detajli	 edition	 latex	 nitrile	 vinyl
Tip	brez pudra, s sintetično notranjo oblogo	pudrani	brez pudra	brez pudra/pudrani
Material	naravni lateks (NR)	naravni lateks (NR)	nitril-butadien rubber (NBR)	PVC (polivinilklorid)
Površina	teksturirana oprijemljiva	teksturirana gladka	teksturirana gladka	gladka
Barva	bela	bela	modra	transparentna
Oblika rokavice	ploska z zvitim robom	ploska z zvitim robom	ploska z zvitim robom	ploska z zvitim robom
Dolžina/velikost po EN 455-2	XS, S, M, L, XL: min. 240 mm	XS, S, M, L, XL: min. 240 mm	S, M, L, XL: min. 240 mm	S, M, L, XL: min. 240 mm
Debelina na dlani	0,16 +/-0,03 mm	0,16 +/-0,03 mm	0,14 +/-0,03 mm	0,13 +/-0,03 mm
Tesnjene po EN 455-1	AQL 1,5	AQL 1,5	AQL 1,5	AQL 1,5
Odpornost proti utrgu po EN 455-2	≥ 9 N	≥ 9 N	≥ 9 N	≥ 3,6 N
Rok skladiščenja v originalni ovojnini embalaži pri skladiščenju DIN 7716, ISO 2230	3 leta	3 leta	3 leta	5 leta
Embalaža				
	v kartonu z odprtino za odzem	100 kosov nepakiranih	100 kosov nepakiranih	100 kosov nepakiranih
	v transportnem kartonu	1.000 kosov	1.000 kosov	1.000 kosov
Oznaka	EN 1041 + EN 980	EN 1041 + EN 980	EN 1041 + EN 980	EN 1041 + EN 980

Rokavice se proizvajajo s sistemom upravljanja kakovosti po EN ISO 9001, EN ISO 13485 in EN 556 za sterilne izvode ter z upoštevanjem smernic GMP.

Žig zastopnika/etiketa